



Patientenversorgung

Vorwort

An Ihrer Seite. TapMed.

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit dem vorliegenden Katalog hochwertige und innovative Produkte für die Bereiche Pflege, Lagerung, Dekubitusprophylaxe, Hygiene und Patientensicherheit für Intensivstationen vorstellen zu dürfen.

TapMed ist seit über 30 Jahren der verlässliche Partner von Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen in Deutschland. Unser Team von mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Außendienst berät umfassend, kompetent und engagiert bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte.

Als Produktspezialist stehen wir gern an Ihrer Seite: Wir freuen uns auf Ihre Aufgaben.

Ihr TapMed Team

Sind Sie an einer **Erprobung**,
einem **Produktmuster** oder einer
Beratung vor Ort interessiert?

Kontaktieren Sie uns:

@ patientenversorgung@tapmed.de

☎ 05606 53060-200



Positionierer	4-9
Kopflagerung	12
TapMed AKADEMIE	13
Patiententransfer	14-19
Patientensicherheit und Frühmobilisation	20-27
Patientenhygiene.....	
Mundhygiene	28-29
Mundpflegesets mit Cetylpyridiniumchlorid	30-31
Mundpflegesets mit Chlorhexidin	32-34
Körperpflege.....	35-36
Stuhlmanagement	37
Zubehör für die Intensivstation	38

Legende

Symbol	Erklärung	Symbol	Erklärung
	CE - zertifiziert		Röntgenstrahlendurchlässig
	EN ISO - zertifiziert		MRT - geeignet
	Unsteril		Maschinenwaschbar bis 65°C
	Latexfrei		Verschweißte Nähte
	Phthalatfrei		Filtersystem
	Nicht wiederverwendbares Einmalprodukt		Memory Schaum
	Mehrfach verwendbares Ein-Patienten-Produkt		Mikrofaser Vlies
	Maximale Belastbarkeit in kg		

Positionierer



SleepAngel® - hygienisch, formstabil und sicher Dank PneumaPure® Filtertechnologie

Die innovative PneumaPure® Filtertechnologie der SleepAngel®-Produkte bietet klinisch nachgewiesene Vorteile:

Der Eintritt von Krankheitserregern und Allergenen (z. B. MRSA, Coronavirus, Norovirus, C.diff, E.-Coli usw.) in das Innere der Produkte wird wirksam verhindert. Gleichzeitig ermöglicht PneumaPure® den aktiven Luftaustausch.

SleepAngel®-Produkte können mit handelsüblichen Mitteln wischdesinfiziert werden.

Alle Nähte der SleepAngel®-Produkte sind hygienisch verschweißt, sodass auch hier keine Verunreinigungen ins Innere gelangen können. Die hautsympathische Soft-Touch-Oberfläche unterstützt den Wärmehaushalt des Patienten.

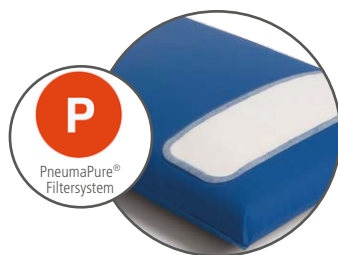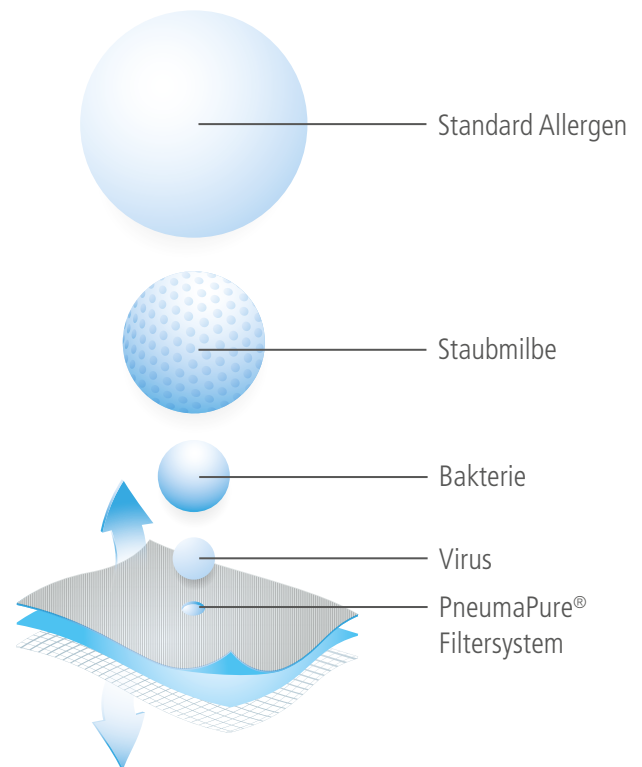

SleepAngel® Positionierer

Dank des hochwertigen Memory-Schaums in den SleepAngel® Positionierern können diese Produkte universell verwendet werden:

Zur Positionierung des Patienten bspw. in Rücken- oder Seitenlage, zur Positionierung der Extremitäten oder auch zur Unterstützung in der Bauchlage.

SleepAngel® Positionierer sind auch zur sanften Unterstützung der Lagerung des Kopfes geeignet.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3012022-single	SleepAngel® Positionierer klein	30 x 40 x 8 cm	1 Stück
3012022-4	SleepAngel® Positionierer klein	30 x 40 x 8 cm	4 Stück
3012093-single	SleepAngel® Positionierer groß	40 x 80 x 12 cm	1 Stück
3012093-4	SleepAngel® Positionierer groß	40 x 80 x 12 cm	4 Stück

SleepAngel® Keil und Rolle

Der SleepAngel® Keil unterstützt die seitliche Lagerung von Patienten und die Stabilisierung bspw. von Armen, Beinen oder Kopf.

Der verwendete Memory-Schaum ist hierbei ebenso formgebend und stabilisierend wie anschmiegsam.

Universell einsetzbare Memory-Schaum-Rolle, mit hygienisch verschweißten Nähten und PneumaPure-Filtersystem.

Die Rolle bietet einfache Patientenpositionierung und sorgt für optimale Druckentlastung.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3012072-single	SleepAngel® Keil	40 x 20 x 10 cm	1 Stück
3012072-4	SleepAngel® Keil	40 x 20 x 10 cm	4 Stück
3012047-single	SleepAngel® Rolle	60 x 15 cm	1 Stück
3012047-4	SleepAngel® Rolle	60 x 15 cm	4 Stück

Positionierer

SleepAngel® Lagerungsschlange

Die SleepAngel® Lagerungsschlange ist im Klinikbetrieb vielseitig einsetzbar: Sie kann zur Stabilisierung und druckentlastenden Lagerung von Patienten genutzt werden. Die SleepAngel® Lagerungsschlange ist mit einem hochwertigen, formstabilen Microfaser-Vlies gefüllt. Dieses Microfaser-Vlies ermöglicht, dass das Produkt bedarfsgerecht an den Patienten angepasst werden kann und nach Gebrauch stets in die Ursprungsform zurückfindet.

SleepAngel® Lagerungsschlange gibt es in zwei Ausführungen mit 1700 g (Standard) und 1300 g (Light) Füllung, um die Patienten bestmöglich zu lagern.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3014001-single	SleepAngel® Lagerungsschlange Standard	Länge 190 cm / Ø 35 cm	1 Stück
3014001-2	SleepAngel® Lagerungsschlange Standard	Länge 190 cm / Ø 35 cm	2 Stück
3014006-single	SleepAngel® Lagerungsschlange Light	Länge 190 cm / Ø 35 cm	1 Stück
3014006-2	SleepAngel® Lagerungsschlange Light	Länge 190 cm / Ø 35 cm	2 Stück

SleepAngel® Still- und Relaxkissen

Das SleepAngel® Still- und Relaxkissen ist anatomisch geformt und legt sich sanft um den Körper der stillenden Mutter. Die hochwertige, formstabile Schaumstoff-Füllung aus Vlies bietet sicheren Halt für das Baby während des Stillens.

Nach dem Stillen kann das Baby zur Entspannung im Rund des Still- und Relaxkissens abgelegt werden.

Alle Nähte des Kissens sind luftdicht verschweißt. Dank des patentierten PneumaPure® Filters kann das Kissen „atmen“, wobei nichts als pure Luft ins Innere des Kissens dringt. Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger werden sicher herausgefiltert.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3012101-single	SleepAngel® Still- und Relaxkissen	60 x 60 x 16 cm	1 Stück
3012101-4	SleepAngel® Still- und Relaxkissen	60 x 60 x 16 cm	4 Stück

135° Positionierung

Art.-Nr.: 3012022-single
SleepAngel® Positionierer klein

Art.-Nr.: 3014001-single
SleepAngel® Lagerungsschlange Standard

Art.-Nr.: HSO08
Fersenschutz



Bettwaren und Positionierer

Trulife Positionierpolster

Trulife Positionierpolster sind universell einsetzbare, aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen (Slow-Foam und Memory-Foam) gefertigte Lagerungshilfen.

Hygienischer Vorteil: Die Nähte des latexfreien, hautfreundlichen Obermaterials sind ultraschall-versiegelt.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
ELP214	Positionierpolster Rolle	50 x 12 cm	1 Stück
ELP011	Positionierpolster Quader	33 x 23 x 5 cm	1 Stück
ELP049	Positionierpolster Keil	20 x 25 x 10 cm	1 Stück

Trulife Positionierpolster ELP914 und EL904

Mit dem PronePad ELP914 und dem EL904 werden Patienten in der Bauchlage druckentlastend positioniert. Beide Produkte sind für den Einsatz im OP und der ITS bestens geeignet.

Die Aussparung im Bereich des Abdomens erleichtert die Beatmung der Patienten. Der Ausschnitt im Halsbereich ermöglicht einfachen Einsatz eines Kopfpolsters.

Im Axilla-Bereich ist das Polster beidseits abgesenkt, sodass Druck und Kompression vermieden wird.

Besonderheit des EL904: Auf der Oberfläche des formgebenden Schaumstoffs ist eine zusätzliche Gel-Schicht aufgebracht. Diese Gel-Schicht sorgt für eine optimale Druckverteilung.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
ELP914	Positionierpolster Prone Pad	101,4 x 48 x 14 cm	1 Stück
EL904	Körperpositionierpolster Bauchlage	111,5 x 52 x 14 cm	1 Stück
116854	Passende Softmat Schaumstoffpolsterauflage	100 x 50 x 2 cm	6 Stück


Trulife ARDS Polster-Set ELP200T

Das ARDS Polster-Set wird zur Lagerung von Patienten in Bauchlage verwendet. Es besteht aus vier einzelnen Komponenten.

Die hochwertigen Schaumstoffpolster sind mit einem hautfreundlichen Obermaterial überzogen. Alle Nähte sind hygienisch ultraschall-verschweißt, außerdem erlaubt ein Hygiene-Filter den Luftaustausch. Krankheitserreger können nicht in die Schaumstoffpolster eindringen.

Die Komponenten des Sets werden ergonomisch unter dem Patienten angeordnet, damit eine optimale, druckentlastende Lagerung gewährleistet werden kann. Die Freilagerung des Abdomens erleichtert die Beatmung.

Zusätzlichen Schutz der Haut bietet unsere Softmat-Schaumstoffauflage.

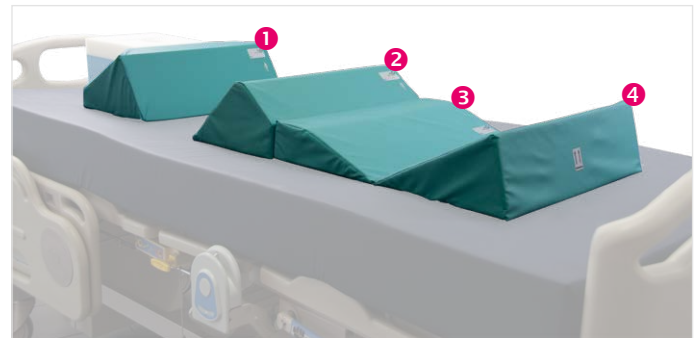

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
ELP200T	ARDS Polster-Set für die Bauchlage	4-teilig	1 Set
Die Produkte des Sets sind auch einzeln erhältlich:			
ELP215	① ARDS Brust-Polster	30 x 50 x 17,1 cm	1 Stück
ELP216	② ARDS Bauch-Polster	30 x 50 x 16,1 cm	1 Stück
ELP217	③ ARDS Hüft-Polster	30 x 50 x 8,1 cm	1 Stück
ELP218	④ ARDS Positionierpolster Keil	31 x 50 x 15 cm	1 Stück
5823-10	Schaumstoff-Einmalarmpolster	-	6 Paar
118299	Softmat Schaumstoffpolsterauflage universal I	61 x 50 x 2 cm, passend für ELP200T	6 Stück

Softmat Schaumstoffauflagen

Softmat Schaumstoffauflagen sind in unterschiedlichen Größen und Zuschnitten erhältlich.

Sie unterstützen die Pflegenden bei der professionellen Patientenlagerung. Das hochwertige offenporige Material der Softmat verteilt den Auflagedruck nahezu gleichmäßig. Sogenannte Hotspots der Druckbelastung werden damit vermieden, das Gewicht des Patienten wird gleichmäßig verteilt. Das atmungsaktive Material führt Feuchtigkeit und übermäßige Wärme von der Haut des Patienten ab und unterstützt ein gesundes Auflageklima.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
118299	Softmat Schaumstoffpolsterauflage universal I	61 x 50 x 2 cm	6 Stück
142491-28	Softmat Schaumstoffpolsterauflage universal II	55 x 42 x 2 cm	28 Stück

Kopflagerung

Positionierung mit Köpfchen

Die Lagerung des Kopfes auf der Intensivstation ist eine große Herausforderung, weil die Patienten über längere Zeit in einer Position verbleiben. Die Produkte aus dem OP konnten diese Anforderungen oft nicht erfüllen und waren eher eine Notlösung. Zum Glück hat sich die Situation in den letzten Jahren für die Patienten und das Pflegepersonal verbessert. Wir stellten fest, dass gerade Kopfpositionierer aus Schaumstoff bzw. mit einer Schaumstoffeinlage diese Aufgabe am besten lösen. Die Qualität des Schaumstoffes spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir bieten für die Kopflagerung bewährte Produkte, die die Haut schützen, die Feuchtigkeit ableiten und eine ausgezeichnete Druckentlastung gewährleisten.



Art.-Nr.: 5823-10
Schaumstoff-Einmalarmpolster

ProneView® System

Das Original ProneView® ist das bewährte System für die Positionierung des Kopfes in der Bauchlage.

- Hygienisch durch Einweg-Polstereinsätze aus Schaumstoff
- Überragende Augenvisualisierung
- Der Tubus kann seitlich ausgeführt werden
- Optimale Druckverteilung
- Einstellbare, neutrale Halspositionierung durch höhenverstellbaren Spiegel (D28590) bzw. höhenverstellbare Basisschale (D28502)

Es sind zwei unterschiedliche Produkt-Sets erhältlich:

- a** Wiederverwendbarer Spiegel (D28520 oder D28590)
Wiederverwendbare Basisschale (D28501)
- b** Wiederverwendbare Basisschale mit Handrädern zur Höhenjustierung (D28502) und dazugehörendem Spiegel (D28580)

Zur idealen Anpassung an die Größe des Patientenkopfes stehen drei Original-Polstereinsätze zur Auswahl:

Art.-Nr. D28507 - klein
Art.-Nr. D28505 - mittel
Art.-Nr. D28503 - groß

ProneView® ist einfach in der Handhabung, verhindert Druck auf die Augen und unterstützt die Anästhesie in der Überwachung des Patienten bei langen Operationen und bei Risikopatienten.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
D28501	Basisschale	passend zu Spiegel D28520 / D28590	1 Stück
D28520	Spiegel mit zwei Aufsetzpunkten	-	1 Stück
D28590	Spiegel mit vier Aufsetzpunkten	höhenverstellbar	1 Stück
D28510	ProneView® Basisschale u. Spiegel	höhenverstellbar	1 Set
D28502	Basisschale mit Handrädern	höhenverstellbar, passend zu D28580	1 Stück
D28580	Spiegel	passend zu Basisschale D28502	1 Stück
5823-10	Schaumstoff-Einmalarmpolster	-	6 Paar
118299	Softmat Schaumstoffpolsterauflage universal	61 x 50 x 2 cm	6 Stück

Kopflagerung

GentleTouch®

Das GentleTouch® Kopfpolster - eine einfache und sichere Kopflagerung in der Bauchlage; verhindert Druck auf die Augen auch bei längeren Operationen. GentleTouch® ist ein hygienisches Einmalprodukt aus stabilem, formgebendem, blauem Schaumstoff und einer weißen, weichen Schaumstofflage für den direkten Kontakt mit dem Gesicht.

GentleTouch® Kopfpolster sind in unterschiedlichen Größen mit Intubationsausgang wahlweise zur rechten oder zur linken Seite erhältlich.

Der Tubus muss nicht diskonnektiert werden.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
1937DZ	GentleTouch® Kopfpolster groß rechter Intubationsausgang	24 x 26 x 18 cm	12 Stück
1941DZ	GentleTouch® Kopfpolster groß linker Intubationsausgang	24 x 26 x 18 cm	12 Stück
1937SDZ	GentleTouch® Kopfpolster mittel rechter Intubationsausgang	24 x 26 x 13 cm	12 Stück
1941SDZ	GentleTouch® Kopfpolster mittel linker Intubationsausgang	24 x 26 x 13 cm	12 Stück
1948DZ	GentleTouch® Kopfpolster klein rechter Intubationsausgang	20,5 x 18 x 10 cm	12 Stück

ValueTouch™

Das hochwertige, phtalat- und latexfreie ValueTouch™ Schaumstoffpolster wird für die Lagerung des Kopfes in Rücken- und Seitenlage verwendet.

Es ist ein hygienisches Einmalprodukt und sorgt für eine gute Druckverteilung.

Das ValueTouch™ Schaumstoffpolster ermöglicht die Freilagerung des Hinterkopfes in Rückenlage sowie die Freilagerung des Ohrs in Seitenlage.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
1902-20	ValueTouch™ Kopfpolster	20 x 21 x 10 cm	20 Stück

Wissen - immer einen Schritt voraus

Die fachgerechte Patientenpositionierung ist eine Voraussetzung zur Vermeidung von lagerungsbedingten Schäden im stationären, intensivmedizinischen und operativen Bereich. In unseren Workshops vermitteln wir Ihnen die Umsetzung der sicheren Patientenpositionierung in Theorie und Praxis. Unsere Referenten schulen praxisbezogenes Wissen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Standards zu diesen Themen:

Patientenpositionierung · Patiententransfer · Patientenmobilisation · Rückenschonendes Arbeiten

Inhalte unserer Workshops

Sichere Patientenlagerung im OP

- Grundlegende Standardpositionierungen für alle Fachbereiche
- Umgang mit OP-Tisch
- Einsatz von innovativen Positionierhilfen im OP
- Patientensicherheit durch Prävention und Prophylaxe
- Hygienische Arbeitsabläufe und sichere Arbeitsweise im OP
- Rückenschonendes Arbeiten

Sichere Patientenlagerung auf der ITS

- Grundlegende Standards zur sicheren Patientenpositionierung in 180° Bauchlage
- Scherkraftfreier Patiententransfer
- Einsatz von innovativen Positionierhilfen auf der ITS
- Patientensicherheit durch Prävention und Prophylaxe
- Hygienische Arbeitsabläufe und sichere Arbeitsweise
- Rückenschonendes Arbeiten



Schulungsleiterin TapMed AKADEMIE

Tanja Nelges

Fachpflegerin im Operationsdienst



Patiententransfer

Transfer und Pflege von Patienten ist häufig mit großen Herausforderungen verbunden.

Nicht nur mangelnde Zeit und immer knapper werdende personelle Ressourcen, sondern auch zunehmend adipöse Patienten erschweren den Alltag in Pflege und Rettungsdienst. Aufgaben, die bei normalgewichtigen Patienten von 1 oder 2 Mitarbeitern erledigt werden, erfordern bei Adipositas nicht selten 4 bis 6 Mitarbeiter bei zugleich deutlich höherem Zeitaufwand.

Immer bleibt die hohe körperliche Belastung und auch für die Patienten ist es häufig schambesetzt und unter Umständen sogar schmerzhaft, von so vielen Pflege- bzw. Rettungskräften bewegt werden zu müssen.

TapMed hat mit den folgenden Produkten bewährte Lösungen für Klinik, Rettungsdienst und Pflege. Die Produkte sind zeit- und kraftsparend sowie wertschätzend für Patient und Personal.

Schwere Fälle leicht gemacht

Ihr Katalog für Patiententransfer, Rettung und Bauchlagerung



**Fordern Sie Ihr
kostenloses Exemplar an:
Tel.: 05606 53060-200**



HoverMatt® Pneumatisches Umbettungssystem

Ein Luftpolster unter der HoverMatt® ermöglicht den nahezu reibungslosen und leichten seitlichen Transfer und die Positionierung von Patienten. Verletzungen beim Patienten durch Scherkräfte während des Transfers werden vermieden. Das HoverMatt®-System reduziert gleichermaßen die Belastung für Patienten und Pflegepersonal. Das pneumatische Umbettungssystem hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg. Es ist latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig und MRT-geeignet. HoverMatt ist ideal zum Transfer auch adipöser Patienten und in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

HoverMatt® - mehrfach verwendbar

Die HoverMatt® ist als mehrfach verwendbares, wiederaufbereites Umbettungssystem in unterschiedlichen Breiten und Qualitäten erhältlich. Diese Produkte sind latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig, MRT-geeignet, wischdesinfizierbar und bei 65°C in der Maschine waschbar. Die Nähte dieser HoverMatt® sind RF-verschweißt und damit sehr robust. Die Produkte HM34DC sowie HM39DC verfügen zusätzlich über eine Doppelbeschichtung. Das erhöht die Haltbarkeit. Für die wiederverwendbare HoverMatt® wird die Verwendung von Einmal-Schutzbezügen empfohlen (Art.-Nr. HMDS3-CASE).

HoverMatt® - Einpatienten-Modell

Neben den vorstehenden Modellen führen wir die HoverMatt® als Einpatienten-Modell: Art.-Nr. HM34SPU. Diese HoverMatt® kann während des Klinikaufenthaltes bei dem Patienten verbleiben und wird im Anschluss entsorgt. Das Risiko von Kreuzkontaminationen wird reduziert. Die Kosten für Reinigung und Aufbereitung werden gespart.



HTAIR2300

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HM34HS	HoverMatt®, Größe 2	86 x 198 cm	1 Stück
HM39HS	HoverMatt®, Größe 3	99 x 198 cm	1 Stück
HM34DC	HoverMatt®, Doppelbeschichtung, Größe 2	86 x 198 cm	1 Stück
HM39DC	HoverMatt®, Doppelbeschichtung, Größe 3	99 x 198 cm	1 Stück
HM34SPU	HoverMatt®, Einpatienten-Modell, Größe 2	86 x 198 cm	10 Stück
HM39SPU	HoverMatt®, Einpatienten-Modell, Größe 3	99 x 198 cm	10 Stück
HMDS3-CASE	Einmal-Schutzbezüge für HoverMatt®	109 x 218 cm	100 Stück
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse	230 V	1 Stück

Patiententransfer

HoverJack® Pneumatischer Patientenlifter

Mit dem HoverJack® werden (auch bariatrische) Patienten sicher und leicht angehoben und transportiert. Gestürzte Patienten werden mittels vier Luftkammern bequem auf bis zu 76 cm Höhe angehoben. Die teflonbeschichtete Unterseite des HoverJack® ermöglicht den Transport über Flure und Treppen. In der Kombination mit der HoverMatt® können Patienten von dem HoverJack® zum Bett oder OP-Tisch umgelagert werden.

Tragfähigkeit: 544 kg

Material: Oberseite Nylon, Unterseite Teflon und imprägniertes Polyester, latexfrei, wischdesinfizierbar



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HJ3202T	HoverJack®	81 x 198 x 76 cm	1 Stück
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse	230 V	1 Stück




Evacuation HoverJack® pneumatischer Patientenlifter

Der Evacuation HoverJack® wurde speziell für die Evakuierung von Patienten entwickelt. Zusätzlich zu den Produkteigenschaften des HoverJack® verfügt der Evacuation HoverJack® über folgende Vorteile:

Der verstärkte, teflonbeschichtete Boden in Verbindung mit der robusten Ummantelung dieses Transportproduktes ermöglicht den Einsatz auf nahezu jedem Untergrund. Der Patient wird während des Transportes mit Fuß-Sack und Hosenträgergurten gesichert. Ein aufblasbarer Kopfkeil erhöht den Komfort des Patienten während des Transportes. Die Pflege-/ Rettungskräfte bewegen den Evacuation HoverJack® mittels breiter, stabiler Gurte. Rückenbelastendes Heben entfällt. Der Evacuation HoverJack® kann u.a. für die Evakuierung in engen Treppenhäusern genutzt werden.

Doppelter Vorteil:

- Der Transport mit dem Evacuation HoverJack® ist für den Patienten sicher und schonend.
- Die Pflege-/ Rettungskräfte arbeiten ergonomisch, kraftsparend und rückschonend.

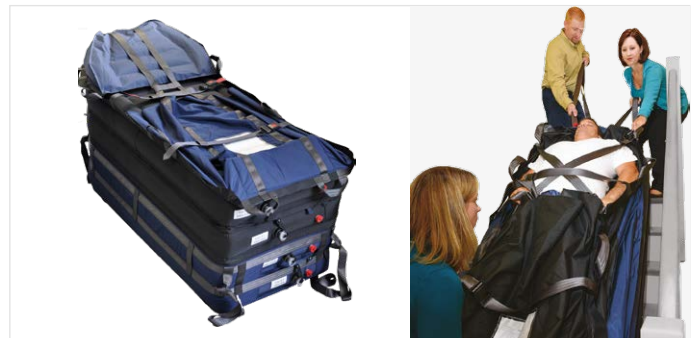


HTAIR2300

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HJ32EV-2	HoverJack® Evacuation II	82 x 183 x 76 cm	1 Stück
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse	230 V	1 Stück

Q2ROLLER® - drehen - mobilisieren - Bauchlagerung

Das regelmäßige Umlagern ist für bettlägerige Patienten kritisch. Bislang ist es eine Herausforderung für die Pflegekräfte, diese zeit- und kraftintensive Aufgabe zu meistern. Dafür hat HoverTech den Q2ROLLER® entwickelt. Ein Produkt, das das laterale Drehen von Patienten effizient und leicht macht. Der Q2ROLLER® verfügt über 2 Luftkammern. Diese Luftkammern werden von einer Pflegekraft mittels Gebläse kontrolliert belüftet, um die optimale Position für das Wohlbefinden des Patienten zu erreichen und ihn vor Druck zu schützen. Der Q2ROLLER® schützt das Pflegepersonal, indem manuelles Heben der Patienten vermieden wird. Des Weiteren schützt der Q2ROLLER® den Patienten, weil Reibungs- und Scherkräfte, wie sie bei herkömmlichen Lagerungsmethoden auftreten können, vermieden werden.

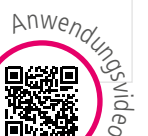

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HTR-200	Q2ROLLER® inkl. 5 Schutzauflege	122 x 112 cm	5 Stück
HTR-CHX-5PACK	Einmalschutzauflege für Q2ROLLER®	-	5 Stück
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse	230 V	1 Stück

Patiententransfer

Z-Slider Transferfolie

Der Z-Slider hilft Schädigungen des Rückens durch das Heben, den Transfer und die Positionierung von Patienten zu verhindern.

Der Z-Slider ist auf Rolle sowie in handlichen Boxen erhältlich. Für die Boxen bieten wir die passende Wandhalterung an.

- Einfaches und sicheres Umlagern von Patienten
- Gleiten statt Heben
- Rückenentlastendes Arbeiten
- Auch zur Anwendung bei adipösen Patienten
- Hygienisches Einmalprodukt
- Latexfrei
- Mit Wandhalterung oder Spenderbox lieferbar



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
2102	Z-Slider	99 x 84 cm / Folie	2 Rollen à 30 Folien
2104	Z-Slider	99 x 84 cm / Folie	6 Boxen à 10 Folien
2104-H-single	Wandhalterung für Art.-Nr. 2104	29,2 x 5,4 x 27,9 cm	1 Stück

Flat Slide Sheet

Flat Slide Sheet - für den einfachen und schonenden Patiententransfer

- Neues Gewebe mit hervorragender Gleitfähigkeit
- Öko-zertifiziert
- Reißfest
- Latexfrei
- Einfache Handhabung
- Hygienisches Einwegprodukt
- Beim selben Patienten mehrfach verwendbar
- Enorme Kraftreduzierung für den Anwender beim Patiententransfer



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
DFS70200X50SP	Flat Slide Sheet	70 x 200 cm	50 Stück

Rollboard

Rollboards ermöglichen den problemlosen und leichten Patiententransfer.

Sie überzeugen durch einfaches Handling und gewährleisten Transfer- und Pflegesicherheit.

Die Rollboards sind röntgen- und MRT-geeignet. Sowohl Rollboards als auch Cover sind einfach zu reinigen.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
PMF-9095	Rollboard inkl. Cover	95 x 50 cm	1 Stück
PMF-9085	Rollboard, faltbar inkl. Cover	95 x 50 cm	1 Stück
PMF-9150	Rollboard, faltbar inkl. Cover	150 x 60 cm	1 Stück
PMF-9170	Rollboard, faltbar inkl. Cover	180 x 50 cm	1 Stück
PMF-9086	Ersatzcover für PMF-9085 und PMF-9095	-	1 Stück
PMF-9171	Ersatzcover für PMF-9170	-	1 Stück
10-102	Wandhalterung für Rollboard	8 x 16 x 14 cm	1 Stück

Schutz- und Gleitfolien für Rollboard

Die grünen Gleitfolien werden für Positionswechsel und Transfers von Patienten verwendet. Der Einweggebrauch der Gleitfolien bietet eine schnelle und hygienische Anwendung. Rückengerecht und kraftsparend für die Pflegekräfte, einfach und schonend für den Patienten, reduzieren die Einweg-Gleitfolien die Reibungskräfte bei der Umlagerung. Die grüne Gleitfolie ist biokompatibel und kann individuell auf Länge zugeschnitten werden. Gebrauch mit dem Rollboard: Das Cover wird entfernt, die grüne Gleitfolie sodann über das Rollboard gezogen.

Die transparente Einweg-Schutzfolie wird über das Rollboard und Cover gezogen und an der Perforation abgetrennt. Die Einweg-Schutzfolie verhindert die Kontamination von Rollboard und Cover. Gleitfolie und Einweg-Schutzfolie sind latexfrei und aus LDPE* gefertigt. * Low-Density Polyethylen (Weich-Polyethylen)



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
PM-060.60-100	Einweg-Gleitfolie, grün	60 x 1000 cm	1 Rolle
PMF-0192	Einweg-Schutzfolie, transparent	55 x 180 m / Folie	1 Rolle à 55 Folien
PMF-0191	Einweg-Schutzfolie, transparent	55 x 90 cm / Folie	1 Rolle à 110 Folien

Patientensicherheit & Frühmobilisation

Patientensicherheit ist im Krankenhaus, im häuslichen Bereich und auch bei Krankentransporten ein wichtiger Aspekt. Patienten, die Aggressionen im Krankheitsbild aufweisen, können sich selbst aber auch das Pflegepersonal schwer verletzen. Um den Patienten in Pflegebetten und Rollstühlen bestmöglichen Schutz zu bieten, finden Sie bei uns bedarfsgerechte Fixiersysteme. Diese sind individuell einsetzbar und einfach in der Handhabung.

SafeFix Hand- und Fingerfixierung

Für Erwachsene, inklusive Fix Band - Fixierband*.

SafeFix ist eine weich gepolsterte Hand- und Fingerfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

SafeFix verhindert jegliches Manipulieren an Infusionen, Kathetern, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Selbstschutz der Patienten. Hände und Finger sind wie in einem Fäustlinghandschuh geschützt.

* Das Fix Band - Fixierband ist auch separat erhältlich.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOSAFIX5000	SafeFix Hand- und Fingerfixierung	groß, 18 cm	10 Stück
HSOSAFIX4000	SafeFix Hand- und Fingerfixierung	klein, 15 cm	10 Stück
HSOFIXBAND6000	Fix Band Fixierband	Länge 250 cm	100 Stück

SafeFix Light Hand- und Fingerfixierung

Für Erwachsene, inklusive Fix Band Fixierband*.

Während die Systematik von SafeFix das Manipulieren an Infusionen etc. verhindert, ermöglicht hier eine Stoffklappe an den Fingerspitzen die Messung lebenswichtiger Indikatoren. Eine doppelte Polsterung wirkt zudem unterstützend auf die körpereigene Temperatur an Händen und Fingern.

* Das Fix Band - Fixierband ist auch separat erhältlich.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOSAFIX5000L	SafeFix Light Hand- und Fingerfixierung	18 cm	10 Stück
HSOFIXBAND6000	Fix Band Fixierband	Länge 250 cm	100 Stück

SafeHeat Wärmehandschuh und -pad

Aufwärmen mit System.

SafeHeat ist ein zertifizierter und sicherer Wärmehandschuh zum kontrollierten Erwärmen von Händen und Füßen. Die Wärme wird durch das Schütteln des Wärmepads erzeugt. SafeHeat löst die üblichen Behelfslösungen ab und ermöglicht gleichzeitig zuverlässige Sättigungsmessungen an Händen und Füßen.

Das Wärmepad gibt die benötigte Wärme bis zu 12 Stunden ab. Eine Temperatur von 40°C wird nicht überschritten.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOSAFEHESET	SafeHeat Wärmehandschuh & -pad	-	20 Sets

ProFix multifunktionale Fixationsschiene

Einteilig, gut formbar, schnell zu fixieren mit integrierten Klettbandern.

ProFix ist eine weich gepolsterte Handschiene, die für Patienten aller Altersgruppen geeignet ist.

Die solide Verarbeitung ermöglicht eine problemlose und schmerzfreie Ruhigstellung des Handgelenks bei arteriellen Zugängen und peripheren Infusionen.

ProFix sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung und ist dank des hautfreundlichen Schaumstoffmaterials angenehm zu tragen.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOPF22	ProFix Multifunktionale Fixationsschiene	Länge 22 cm, Breite 9 cm	25 Stück

Patientensicherheit & Frühmobilisation

OPFix Soft Hand- und Fußfixierung

OPFix Soft bietet sowohl für den Anwender als auch den Patienten spürbar höheren Komfort. Die extrem weiche Polsterung der Manschette erhöht den Tragekomfort für den Patienten merklich. Das Band samt Metallring ist stabil mit der Manschette vernäht und erleichtert dadurch die Anwendung. Es kann der jeweiligen Anwendungssituation angepasst werden.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOOPFIX800	OPFix Soft Hand- und Fußfixierung	-	25 Paar

OPFix Hand- und Fußfixierung

OPFix ist eine weich gepolsterte, zweiteilige Hand- und Fußfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

OPFix verhindert das unkontrollierte Manipulieren an Zugängen, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Eigenschutz der Patienten. Bei der Umlagerung der Patienten sorgt das zweiteilige OPFix für eine einfache und schnelle Handhabung.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOOPFIX1000	OPFix - Hand- und Fußfixierung	Halterung aus Metall, inkl. Fix Band	25 Paar
HSOOPFIX1000P	OPFix - Hand- und Fußfixierung	Halterung aus Kunststoff, inkl. Fix Band	25 Paar
HSOFIXBAND6000	Fix Band - Fixierband	Länge 250 cm	100 Stück

TransFix Transport-Fixierung

TransFix ist eine weiche, extra breite Manschette die u.a. Einweg-Druckwandler, EKG-Kabel und Schläuche an den Extremitäten von erwachsenen und jugendlichen Patienten fixiert.


Der atmungsaktive Schaumstoff der Manschette ist hypoallergen. Die sichere Fixierung eines Druckwandlers hilft, die richtigen Werte zu generieren und reduziert zusätzliche Eichungen. TransFix ist in einer Universalgröße erhältlich.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOTRFIX4000	TransFix Transport-Fixierung	-	25 Stück

Stick & Stop Pad Antirutschgitter

Erleichtert das Aufrichten und verhindert das Wegrutschen im Bett.

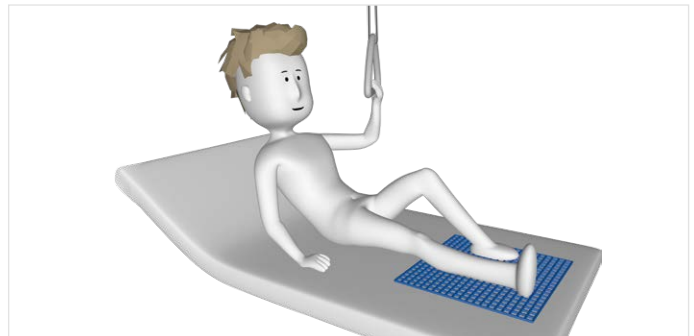

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOMATTE01	Stick & Stop Pad - Antirutschgitter	einteilig, blau, 40 x 55 cm	50 Stück

Sind Sie an einer **Erprobung**, einem **Produktmuster** oder einer **Beratung vor Ort** interessiert?

Kontaktieren Sie uns:

@ patientenversorgung@tapmed.de

☎ 05606 53060-200

tapmed.de/kontakt



Patientensicherheit & Frühmobilisation

TTFix Two Trachealkanülen-Fixierung

TTFix Two ist ein zweiteiliges Fixierband mit Klettverschlüssen. Trachealkanülen können einfach und rasch fixiert werden.

TTFix Two ist für verschiedene Halsumfänge individuell einstellbar.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOTTFIX3010	TTFix Two Trachealkanülen Fixierung	zweiteilig, weiß	25 Stück

ETTFix One Silikon Endotrachealtuben-Fixierung

ETTFix One Silikon ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFix One Silikon besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Bartträger einzusetzen.

Die auf dem Gummiband durchgehend aufgebrachte Silikonbeschichtung hält Endotrachealtuben sicher und fest, ohne verklebt werden zu müssen. Das bietet auch bei stark speichelnden Patienten sicheren Halt ohne zu rutschen.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOETT2010	ETTFix One Silikon Endotrachealtuben-Fixierung	einteilig, silikonbeschichtet, blau	25 Stück

ETTFix One Endotrachealtuben-Fixierung

ETTFix One ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFix One besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Barträger einzusetzen.

Durch die Fixierung des Klettstreifens am Tubus verhindert ETTFix One das Verrutschen des Tubus und minimiert die Gefahr einer Extubation.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOETT2000	ETTFix One Endotrachealtuben-Fixierung	einteilig, weiß	25 Stück

Fersen Fix flexibler Fersenschutz

Der Fersen Fix ist ein einteiliger Fersenschoner zur Vorbeugung von Dekubitalulcera.

Der Fersen Fix sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung der Patienten und ist durch den hautfreundlichen Schaumstoff angenehm zu tragen.

Der Fersen Fix kann durch das Waschen bei 60°C bis zu dreimal wiederaufbereitet und verwendet werden.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSO08	Fersen Fix Flexibler Fersenschutz	einteilig, gelb mit weißem Klettband	25 Stück


Patientensicherheit & Frühmobilisation

SafeBelt

Sicheres Sitzen auf jedem Stuhl.

Wenn Patienten oder ältere, pflegebedürftige Personen in einem Rollstuhl, Transportsessel, Mobilisationsstuhl oder auch einem gewöhnlichen Sessel sitzend positioniert werden, bedarf es oftmals einer Sturzprophylaxe. Das nach vorne Kippen des Oberkörpers oder auch das nach unten Wegrutschen stellen Verletzungs- bzw. Gefahrensituationen dar, die gravierende Folgen haben können. Der SafeBelt gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Patienten stabil und sicher positioniert sind.

- Für jeden Stuhl geeignet
- Breiter gepolsterten Bauchgurt sorgt für komfortablen Halt
- Bei 60° waschbar
- Sicher mit Klicksystem und Lock-Mechanismus

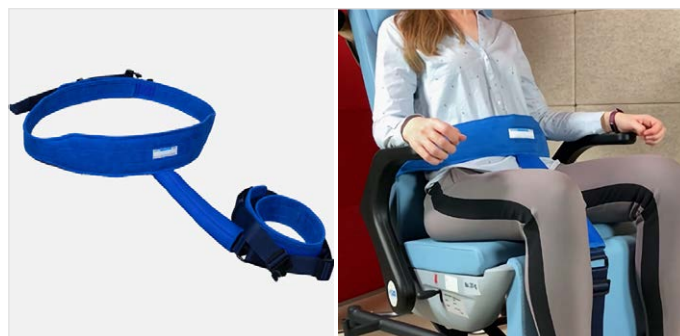


Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOSAFEBELT	Gurtsystem zur Sturzsicherung und Stabilisierung für sitzende Patienten, waschbar	-	3 Stück

ThoraXsafe® Stabilisierung

Stabilisierung im Bett oder auf dem Stuhl.

ThoraXsafe® ist ein weich gepolstertes, vierteiliges Gurtsystem zur Immobilisierung von Patienten.

ThoraXsafe® wurde in enger Zusammenarbeit mit Anwendern auf Intensivstationen und Deeskalationsmanagern in psychiatrischen Kliniken entwickelt, um Patienten mit starkem Bewegungsdrang vor unkontrollierten Bewegungen zu schützen.

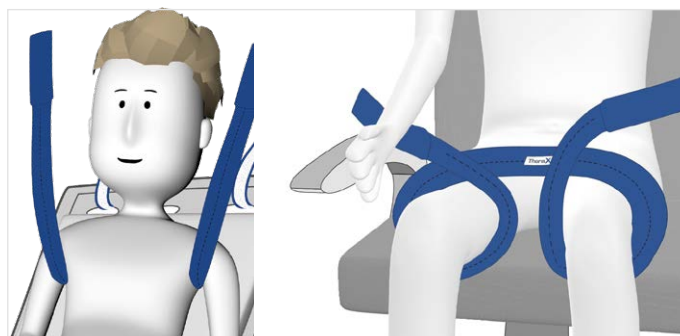

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOTF01	ThoraXsafe® - Stabilisierung	vierteilig	4 Stück

CrossSeat Querbettstuhl - Patientenmobilisation


Der Querbettstuhl kann einfach über einen auf Station vorhandenen Druckluftanschluss oder mit separat zu beziehender, elektrischer Luftpumpe aufgeblasen werden.

Das Produkt ist in jedem handelsüblichen Krankenhausbett in Kombination mit den Fixationselementen (im Set* enthalten) verwendbar. Bitte vor Nutzung darauf achten, dass der Querbettstuhl durch Gurte befestigt ist. Mit Hilfe eines Auslassventiles kann die Luft auch rasch wieder entweichen und der CrossSeat bequem und platzsparend verstaut werden.

- a** Set-Inhalt:
 Querbettstuhl
 Tasche
 Fixationselemente
 Reparaturkit

Der CrossSeatTable kann ausschließlich mit der Hand-Luftpumpe aufgeblasen werden. Er ist einfach am Querbettstuhl und Patientenbett zu befestigen.

- b** Set-Inhalt:
 CrossSeat Table
 Hand-Luftpumpe
 Fixationselemente
 Reparaturkit

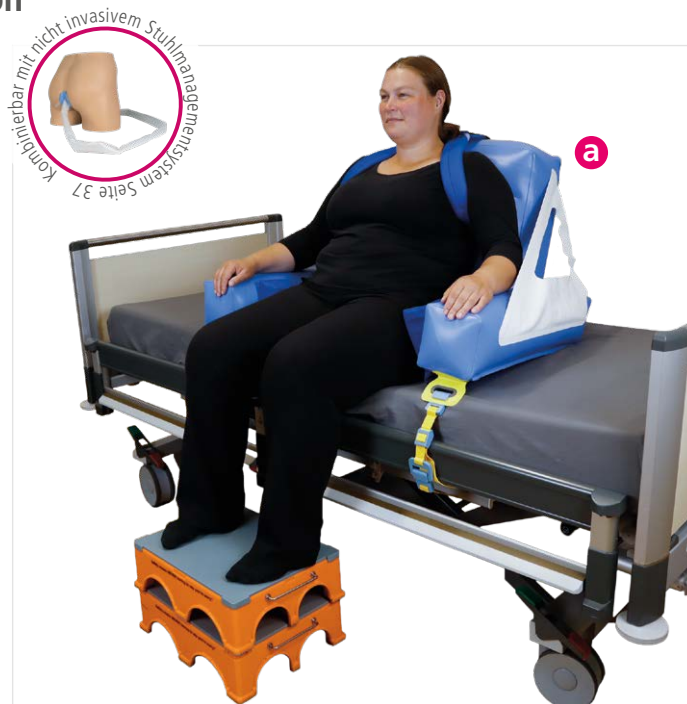

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
HSOCS02	CrossSeat	55 x 50 cm	1 Set
HSOCSFIX02	CrossSeat Fixationselemente	3 Gurte	1 Stück
HSOCS01	CrossSeat Table Aufblasbarer Tisch	-	1 Set
HSOCSFIX	CrossSeat Table Fixationselemente	3 Gurte	1 Stück
HSOCSREP	CrossSeat Reparaturkit	-	1 Stück
HSOHS-318	Elektrische Luftpumpe für CrossSeat	-	1 Stück

Patientenhygiene

Mundhygiene

Mundhygiene

Die Coremec Mundpflegeprodukte erleichtern die Mundhygiene gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zur VAP-Prävention bei intensiv zu betreuenden Patienten.

Mit der Absaugzahnbürste, den Tupfern und der keimhemmenden Reinigungsflüssigkeit entfernen Sie sicher den Plaque auf den Zähnen und die Beläge auf der Schleimhaut. Sie haben die Möglichkeit, während der Mundpflege Flüssigkeiten abzusaugen.

Durch die mechanische Reinigung mit Tupfern wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu verletzen.


Zum Abschluss der Mundpflege öffnen Sie die kleine Tube mit dem Mundbefeuchter und tragen diesen mit dem Tupfer auf. Der Mundbefeuchter wirkt beruhigend auf das Gewebe der Mundschleimhaut und versorgt sie mit Feuchtigkeit.

Mundtupfer

Mit dem weichen Schaumstoffkopf lösen Sie schonend Ablagerungen und Schleim. Gleichzeitig wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu verletzen.

Anwendungsbereiche:

Reinigung der Mundhöhle sowie Auftragen von Medikamenten, Speichelflußanregung und Schluckförderung.

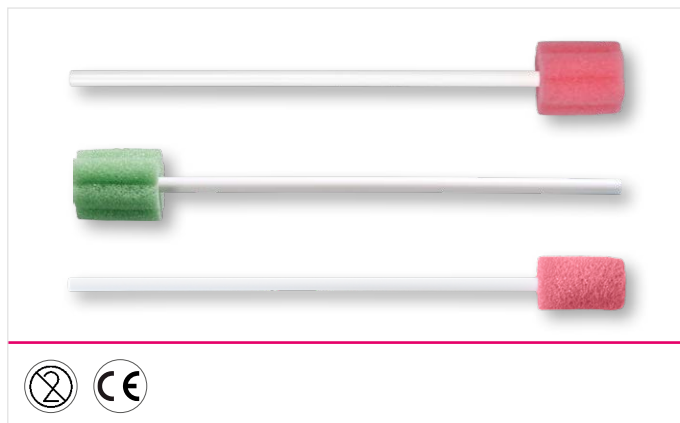

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
A9000-1000	Mundtupfer	einzelnd verpackt, unbehandelt, rosa	1.000 Stück
A9100-1000	Mundtupfer	einzelnd verpackt, behandelt*, grün	1.000 Stück
A9000P-1000	Mundtupfer für Kinder	einzelnd verpackt, unbehandelt, rosa	1.000 Stück

* mit Minzgeschmack

Absaugtupfer

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Die besondere Konstruktion der Absaugtupfer ermöglicht eine gründliche Reinigung bis in die hinteren Bereiche der Mundhöhle und verhindert das Festsaugen an der Schleimhaut. Die Aufsätze säubern den Mundraum und stimulieren zugleich die Mundschleimhaut.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
C9010-500	Absaugtupfer	einzeln verpackt, unbehandelt	500 Stück
C9010-100	Absaugtupfer	einzeln verpackt, unbehandelt	100 Stück
C9110-500	Absaugtupfer	einzeln verpackt, behandelt*	500 Stück
C9110-100	Absaugtupfer	einzeln verpackt, behandelt*	100 Stück

Absaugzahnbürste

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Die weiche Bürste entfernt schonend Beläge ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Durch das Schwämmchen werden Ablagerungen und Schleim gelöst, bei gleichzeitiger Absaugung wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu belasten.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
D9011-500	Absaugzahnbürste	einzeln verpackt, unbehandelt	500 Stück
D9011-100	Absaugzahnbürste	einzeln verpackt, unbehandelt	100 Stück
D9111-500	Absaugzahnbürste	einzeln verpackt, behandelt*	500 Stück
D9111-100	Absaugzahnbürste	einzeln verpackt, behandelt*	100 Stück

* mit Minzgeschmack

Patientenhygiene

Mundpflegesets mit Cetylpyridiniumchlorid

Q8 24-Stunden-Komplett-Set

Das Systempflege-Set besteht aus 3 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 8 Stunden. Diese erleichtern das Einhalten der Pflegerichtlinien. Jedes Komplett-Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution

1 Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K14578GC/48	Q8 24-Stunden-Komplett-Set	für eine Mundpflege alle 8 Stunden	48 Sets

Absaugtupfer-System

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3378G/144	Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Patientenhygiene


Mundpflegesets mit Cetylpyridiniumchlorid

Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter

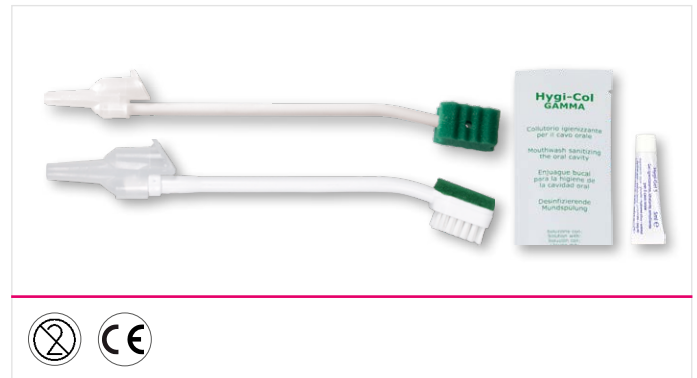


Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3578G/144	Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter

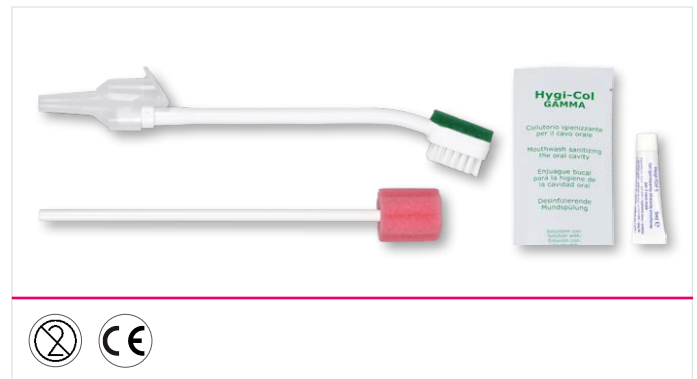

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1578G/144	Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Mundtupfer-System

Zur Mundpflege.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1178G/144	Mundtupfer-System	zur Mundpflege	144 Sets

Patientenhygiene

Mundpflegesets mit Chlorhexidin

Q8 24-Stunden-Komplett-Set

Das Systempflege-Set besteht aus 3 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 8 Stunden. Diese erleichtern das Einhalten der Pflegerichtlinien. Jedes Komplett-Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution

1 Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K14578C-48	Q8 24-Stunden-Komplett-Set	für eine Mundpflege alle 8 Stunden, geeignet für beatmete Intensiv- und Risikopatienten	48 Sets

Q4 24-Stunden-Komplett-Set

Dieses Systempflege-Set besteht aus 6 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 4 Stunden. Diese sind besonders für Patienten geeignet, bei denen eine häufigere Mundpflege erforderlich ist. Jedes Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution

4 Mundhygiene-Sets bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
Q4D	Q4 24-Stunden-Komplett-Set	für eine Mundpflege alle 4 Stunden, geeignet für beatmete Intensiv- und Risikopatienten	24 Sets

Absaugtupfer-Mundtupfer-System

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer behandelt
- 1 Mundtupfer unbehandelt
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter

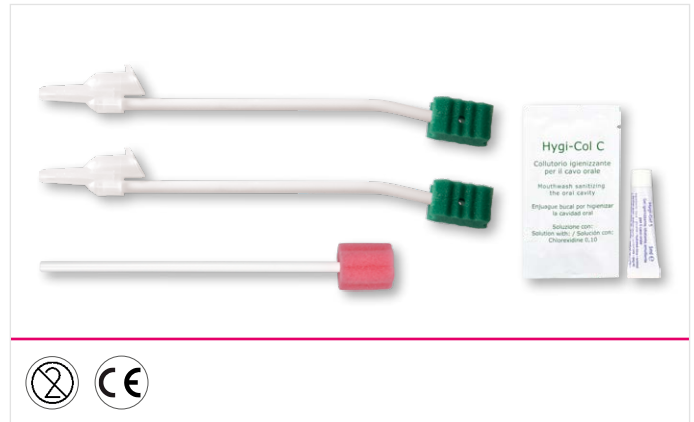

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K14478/144	Absaugtupfer-Mundtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugtupfer-System

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3378-144	Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Patientenhygiene


Mundpflegesets mit Chlorhexidin

Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter

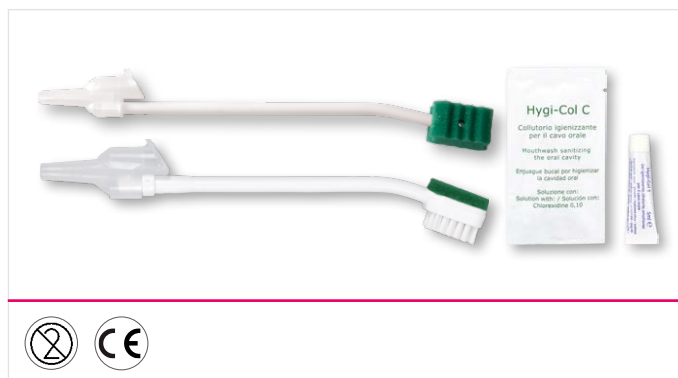


Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3578-144	Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter

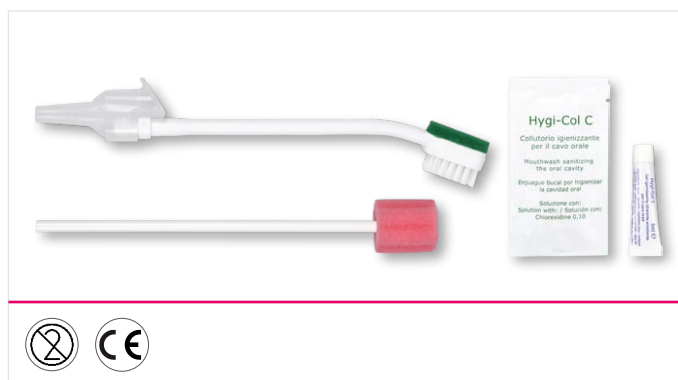


Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1578-144	Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Mundtupfer-System

Zur Mundpflege.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter

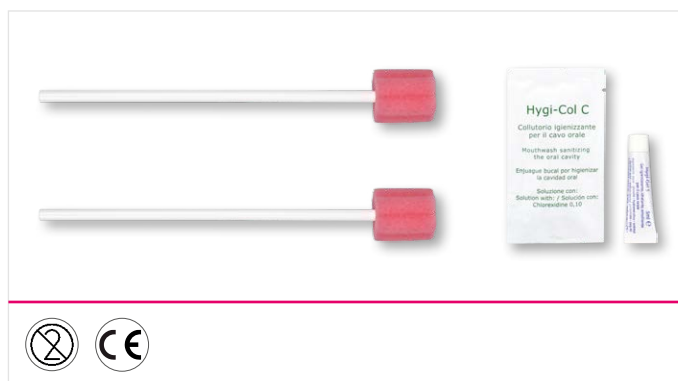

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1178-144	Mundtupfer-System	zur Mundpflege	144 Sets

Körperpflege

Häufig ist das Waschen ohne Wasser für die Körperreinigung in der Pflege unumgänglich, da bettlägerige Patienten oftmals nicht bewegt werden dürfen oder mit besonders empfindlicher Haut zu kämpfen haben.

Die gängigsten Reinigungsprodukte für das Waschen ohne Wasser sind dabei spezielle, mit einer milden Reinigungs lotion getränkte Waschhandschuhe oder Waschtücher. Die Reinigungs lotion pflegt zugleich und muss nach der Körperreinigung nicht abgewaschen werden. Grundsätzlich sollte man auf den Gebrauch von Wasser verzichten, da dieses nicht nur den Schmutz und die Seifenreste entfernt, sondern auch den hauteigenen Säureschutzmantel strapaziert.

Die Produkte ermöglichen eine wasserlose, hygienische und vereinfachte Reinigung von Kopf bis Fuß.
Mit der konsequenten Verwendung von Waschtüchern wird eine potentielle Kreuzkontamination vermieden.


Mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Würde und Lebensqualität des Patienten wir den ersten nicht invasiven Fäkalkatheter in unser Sortiment aufgenommen. Er dient zur Ableitung von flüssigem Stuhl. Das medizinische Einwegprodukt ist sicher, hautfreundlich, diskret und erleichtert den Arbeitsalltag des Gesundheitspersonals.

Bath in bed - Waschtücher

Komplette Reinigung von Kopf bis Fuß!

Bath in bed Waschtücher sind weich aber dennoch fest und robust. Die Waschtücher setzen einen neuen Standard auf dem Gebiet der Ganzkörperreinigung und Feuchtigkeitspflege.

Die Reinigungssubstanzen müssen nicht abgewaschen werden. Die Waschtücher lassen sich in der Mikrowelle erwärmen und sind in einer wiederverschließbaren Packung.

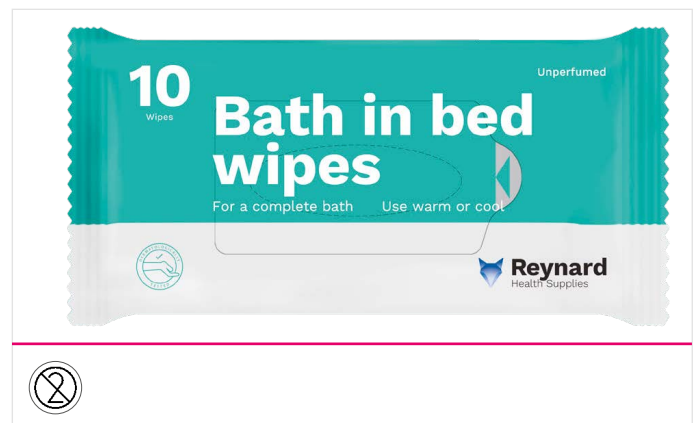

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
RHS102	Bath in bed - Waschtücher	10 Stück je Packung, 30 x 23 cm	24 Packungen

Reynard Hautschuttpflegetuch

Reinigung, Pflege und Hautschutz in Einem!

Bei geröteter, gereizter und angegriffener Haut, wenn eine Reinigung mit Wasser und Seife nicht zu empfehlen ist.

Das Tuch reinigt, pflegt, neutralisiert Gerüche und hinterlässt einen antimikrobiellen Schutzfilm auf der Haut.

Bei regelmäßiger Anwendung werden Hautreizungen und inkontinenzassoziierte Dermatitis vermieden.

Die Tücher befinden sich in einer wiederverschließbaren Packung.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
RHS103	Reynard Hautschuttpflegetuch	30 Tücher je Packung, 33 x 22 cm	12 Packungen

Reynard Haarwaschhaube

Haarwaschhaube ohne Spülen.

Der neue Standard für die Haarwäsche - einfach und schnell!

Durch das milde Shampoo und den Conditioner wird das Haar ganz ohne Wasser gereinigt und gepflegt.

Die Haarwaschhaube lässt sich in der Mikrowelle erwärmen.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
RHS104	Reynard - Haarwaschhaube	1 Stück je Packung	24 Packungen

Furine – das nicht invasive Stuhlmanagementsystem

Mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Würde und Lebensqualität des Patienten hat Furine das erste nicht invasive Stuhlmanagementsystem entwickelt. Es dient zur Ableitung von flüssigem Stuhl (Bristol-Stuhlformen-Skala Typ 6 und 7). Das medizinische Einwegprodukt ist sicher, hautfreundlich, diskret und erleichtert den Arbeitsalltag des Gesundheitspersonals.

Produktvorteile:

- Einfache Anwendung
- Hoher Patientenkomfort
- Hautfreundlich
- Flexible, individuelle und zuverlässige Hautanhaftung
- Patientenmobilisation jederzeit möglich
- Kostenersparnis
- Vereinfachter Pflegeaufwand
- Der Anatomie der perianalen Haut angepasst
- Schlauchlänge 165 cm
- Verwendungsdauer 7 Tage



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
B05DE22	Furine	Nicht-invasives Stuhlmanagementsystem für flüssige Stühle, Fäkalkatheter, Fäkal-Auffangbeutel, Klebender Barrierefilm, 2 medizinische Reinigungstücher (Medical Skin Wipe)	1 Stück
B06DE22	Furine plus	Nicht-invasives Stuhlmanagementsystem für flüssige Stühle Fäkalkatheter mit Geruchsschutz, Fäkal-Auffangbeutel, Klebender Barrierefilm, 2 medizinische Reinigungstücher (Medical Skin Wipe)	1 Stück
B10DE10	Furine Collect	Fäkal-Auffangbeutel	10 Stück
B20DE10	Securin Skin Barrier	Zwei-Komponenten-Kleber zur Befestigung	5 Stück
A00DE11	Medical Skin Wipe - Reinigungstücher	Hautreinigung und Entfernung des Klebefilms	30 Stück
A01DE10	Medical Adhesive Remover - Reinigungsspray	Hautreinigung und Entfernung des Klebefilms	6 Stück



Hören Sie die **EKG-Podcast-Folge** zum Thema **Stuhlmanagement**

Zubehör für die Intensivstation

Druckrezeptorenplatten-Halterung

Der neue Standard der arteriellen Druckmessung auf der Intensivstation oder bei Herzkatheter-Untersuchungen. Das Halterungsset, bestehend aus Klemmplatte, Gelenkarm und Kloben, erlaubt die exakte und sichere Positionierung am Krankenbett auf Herzhöhe. Dieses Haltesystem wurde in enger Zusammenarbeit mit Spitälern für eine besondere Patientenüberwachung entwickelt.

- Sichere Positionierung am Intensivbett auf Herzhöhe
- Flexible und präzise durch den Zentralspanngriff
- Wartungsfreier Betrieb und nachhaltige Lebensdauer




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3640.53	Druckrezeptorenplatten-Halterung	Klemmstück, Gelenkarm 400 mm, Säule, Sockel	1 Stück

Spezial Beatmungsschlauch-Halterung

Mit dem Beatmungsschlauchhalter werden Beatmungsschläuche sicher gehalten. Es werden zwei unterschiedliche, robuste Schlauch-Befestigungen aus Polyamid mitgeliefert: Ein Zweifach-Schlauch-Halter, bei dem Beatmungsschläuche mit einem Durchmesser von 15 bis 27 mm sicher eingelegt werden können. Außerdem wird ein Einfachschlauch-Halter mitgeliefert. Er bietet sicheren Halt für Beatmungsschläuche mit einem Durchmesser zwischen 24 und 33 mm. Die Schlauch-Befestigungen werden ohne Werkzeug am Pendelkopf des Beatmungsschlauchhalters montiert.

Alle Gelenke des Beatmungsschlauchhalters werden mit einem Griff fixiert und gelöst, das ist besonders komfortabel und sicher für den Anwender.

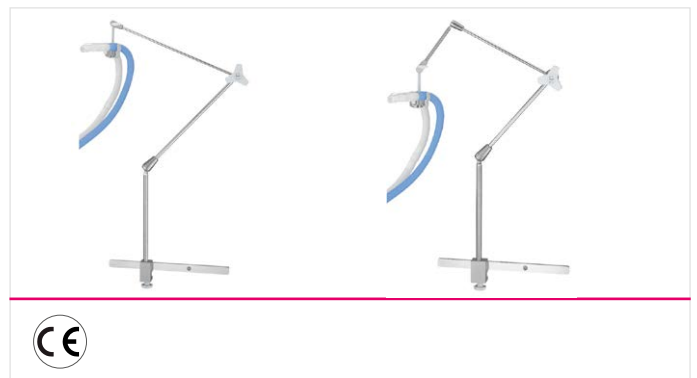


Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
3590.30	Spezial Beatmungsschlauch-Halterung Light mit zentraler Schnellfixierung	Zweifach-Schlauchhalter, Gelenkarm 900 mm	1 Stück
3670.40	Spezial Beatmungsschlauch-Halterung Standard mit zentraler Schnellfixierung	Zweifach-Schlauchhalter, Gelenkarm 700 mm	1 Stück

Patientenlagerung auf der ITS

Die Broschüre im praktischen Kitteltaschen-Format

Fordern Sie Ihr
kostenloses Exemplar an:
Tel.: 05606 53060-200

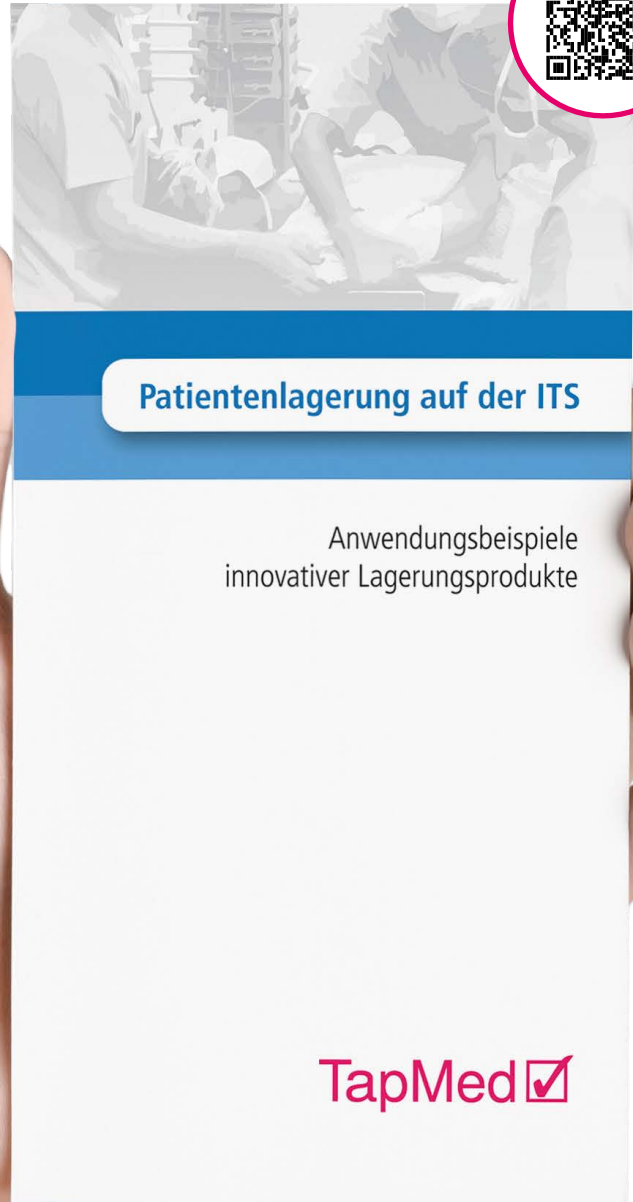

Fotobeispiele aus der Broschüre



TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen

-  www.tapmed.de
-  patientenversorgung@tapmed.de
-  05606 53060-200
-  [tapmed-medizintechnik-handels-gmbh](https://www.linkedin.com/company/tapmed-medizintechnik-handels-gmbh)
-  [facebook.com/tapmed.de](https://www.facebook.com/tapmed.de)
-  [tapmed.de](https://www.instagram.com/tapmed.de)