

TapMed Tiergesundheit

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Vorwort



„Neben der menschlichen, ist die Gesundheit von Tieren das höchste Gut. Wer sich dazu entscheidet, mit Tieren zusammenzuleben, wünscht sich nichts mehr, als ihnen ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen.“
Monika Rinne, Geschäftsführerin TapMed.







Seit mehr als 30 Jahren ist die Firma TapMed ein kompetenter Partner im Vertrieb von innovativen und hochwertigen medizintechnischen Produkten für die Humanmedizin. TapMed fungiert als Bindeglied zwischen den Herstellern und Anwendern. Allen Kunden werden ein umfassender Beratungsservice, Produktschulungen und Workshops geboten, um einen detaillierten sowie transparenten Informationsfluss zu ermöglichen.

Diese langjährige Erfahrung und den umfassenden Service möchte die Firma TapMed auch in der Veterinärmedizin weitergeben und hat ihr Portfolio Ende 2019 um den Bereich Tiergesundheit erweitert.

Unter anderem bietet TapMed ein System zum Wundverschluss an, dass sogar bei großen Bauch-OPs bei Pferden beste kosmetische Ergebnisse liefert. Für Hüft-TEPs, zum Beispiel bei Hunden oder Katzen, ist eine sichere Lagerung erforderlich. Auch hier gibt es eine optimale Lösung. Ein Vakuumkissen lagert das Tier stabil, der Tierarzt hat optimalen Zugriff. Zur Sicherung des OP-Ergebnisses und zur Unterstützung der Hundehalter zu Hause hat TapMed eine einzigartige Matratze entwickelt. Beste Druckentlastungseigenschaften treffen auf höchste Hygienestandards.

Weitere innovative Medizinprodukte finden Sie in diesem Katalog.

Legende

 CE-zertifiziert	 nicht in der Mikrowelle erwärmbar
 Latexfrei	 Memory-Schaum
 Nicht wiederverwendbares Einmalprodukt	 Verschweißte Nähte
 Maschinenwaschbar bis 60°C	 PneumaPure®
 Maximale Belastbarkeit in kg	 Bewertung der Entzündbarkeit
 Röntgenstrahlendurchlässig	

Professionelles Flüssigkeitsmanagement	04-05
Wundversorgung	06-07
Mikrochirurgie.....	08-11
Sicherheitskanülen und -Spritzen	12-15
Arbeitssicherheit	16-18
Lagerung	20-31



Professionelles Flüssigkeits-Management für Sicherheit und Hygiene in allen Räumen

Durch die patentierte Superabsorber-Technologie ist das DryMax VET Super-Saugtuch in der Lage, weitaus größere Mengen Flüssigkeit aufzunehmen als herkömmliche Saugtücher. Wasserbasierte Flüssigkeiten wie Urin, Blut, Fruchtwasser und Spülflüssigkeiten werden im Inneren des Super-Saugtuches sicher gebunden und können tropffrei entsorgt werden.



DryMax VET Super-Saugtuch 5.0 / 2.3

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 5l / 2.3l

- Beidseitig saugfähig
- Kontaminierte Flüssigkeiten werden sicher eingeschlossen
- Nicht zum Zuschneiden geeignet
- Besonders empfehlenswert als Unterlage bei Zahnsanierungen und Arthroskopien sowie in Aufwachboxen



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Saugleistung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
F40004	DryMax VET 5.0 Super-Saugtuch	bis zu 5l	72 x 37	50 Stück
F40005	DryMax VET 2.3 Super-Saugtuch	bis zu 2,3l	72 x 37	30 Stück

DryMax VET Saugtuch

Flüssigkeitsaufnahme bis zu 2l

- Zum individuellen Zuschneiden geeignet
- Folienrücken zur Verringerung der Rutschgefahr
- Nur auf trockenen Flächen platzieren (blaue Seite nach unten)
- Besonders empfehlenswert als Unterlage auf dem OP-Tisch sowie als Bodenabdeckung, um die Rutschgefahr der Angestellten zu verringern



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Saugleistung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
F40011	DryMax VET Saugtuch	bis zu 2l	100 x 75	50 Stück

Wundversorgung

Spezielle Wunden erfordern den gezielten Einsatz spezieller Produkte. Heben Sie die Wundversorgung, insbesondere bei Equiden und Neuweltkameliden, auf ein neues Niveau.



Insorb - subkutikulärer Haut-Hefter


- einziges Hautklammergerät mit resorbierbaren Klammern
- leicht zu erlernende Anwendung
- hervorragende Wundheilung
- glatte Narben



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
2030/I	Insorb - subkutikulärer Haut-Hefter	1 Stück
2030	Insorb - subkutikulärer Haut-Hefter	Box mit 6 Stück

MID-VET™ Silikonexpander

- Steriles chirurgisches Nahtset
- zum Schließen größerer Hautdefekte durch Expansion von gesundem Gewebe
- zum Entlasten von Nähten
- zum Entlasten von zu eröffnendem Gewebe

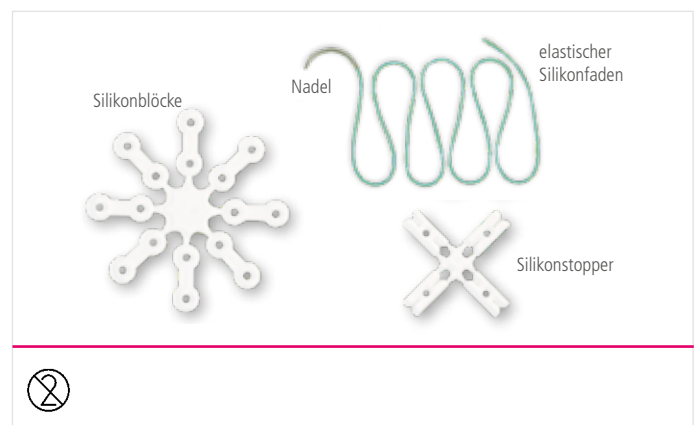

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
MID300V	MID-VET™ Silikonexpander	1 Stück

Microchirurgie

Um hoch qualifiziertem Fachpersonal hoch spezialisierte Produkte bieten zu können arbeiten wir mit exklusiven Lieferanten zusammen. Verlassen Sie sich auf jahrelang erprobte Produkte, die MDR-konform sind und von Experten der Humanmedizin bereits erfolgreich verwendet werden.



MICROSUTURE

- steriles, monofiles Nahtmaterial aus Nylon
- nicht resorbierbar
- Speziell für anspruchsvolle mikrochirurgische Verfahren


Besondere Indikation: Adaption / Ligatur von Weichgewebe bei mikro-, kardio-, neurochirurgischen Verfahren.



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
GEM189BK	MICROSUTURE - 8-0, Nylon rund	4 mm Sehnenlänge, 140 µm Diameter, 3/8 Biegung, 5,1 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM192BK	MICROSUTURE - 8-0, Nylon rund	5 mm Sehnenlänge, 140 µm Diameter, 3/8 Biegung, 6,4 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM395BK	MICROSUTURE - 8-0, Nylon rund-scharf	5 mm Sehnenlänge, 140 µm Diameter, 3/8 Biegung, 6,4 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM177BK	MICROSUTURE - 9-0, Nylon rund	3 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 3,8 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM180BK	MICROSUTURE - 9-0, Nylon rund	4 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 5,1 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM188BK	MICROSUTURE - 9-0, Nylon rund	4 mm Sehnenlänge, 140 µm Diameter, 3/8 Biegung, 5,1 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM386BK	MICROSUTURE - 9-0, Nylon rund-scharf	3 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 3,6 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM389BK	MICROSUTURE - 9-0, Nylon rund-scharf	4 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 5,1 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM171BK	MICROSUTURE - 10-0, Nylon rund	3 mm Sehnenlänge, 70 µm Diameter, 3/8 Biegung, 3,8 mm Nadellänge, 10 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM385BK	MICROSUTURE - 10-0, Nylon rund-scharf	3 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 3,8 mm Nadellänge, 10 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM170BK	MICROSUTURE - 11-0, Nylon rund	3 mm Sehnenlänge, 70 µm Diameter, 3/8 Biegung, 3,8 mm Nadellänge, 10 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM195BK	MICROSUTURE - 11-0, Nylon rund	2,5 mm Sehnenlänge, 50 µm Diameter, 3/8 Biegung, 3,6 mm Nadellänge, 10 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM382BK	MICROSUTURE - 11-0, Nylon rund-scharf	3 mm Sehnenlänge, 70 µm Diameter, 3/8 Biegung, 3,8 mm Nadellänge, 10 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM192BKC	MICROSUTURE - 8-0, Nylon schwarze Nadel, rund	6 mm Sehnenlänge, 140 µm Diameter, 3/8 Biegung, 6,4 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM395BKC	MICROSUTURE - 8-0, Nylon schwarze Nadel, rund-scharf	4 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 5,1 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM180BKC	MICROSUTURE - 9-0, Nylon schwarze Nadel, rund	5 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 5,1 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück
GEM389BKC	MICROSUTURE - 9-0, Nylon schwarze Nadel, rund-scharf	5 mm Sehnenlänge, 100 µm Diameter, 3/8 Biegung, 5,1 mm Nadellänge, 15 cm Fadenlänge	12 Stück

Chirurgische Mikro- und Supermikroinstrumente

- exzellente Führung durch Rundgriff
- Oberfläche reflektiert nicht
- nicht-magnetisches Titan sorgt dafür, dass feine Nadeln nicht haften bleiben

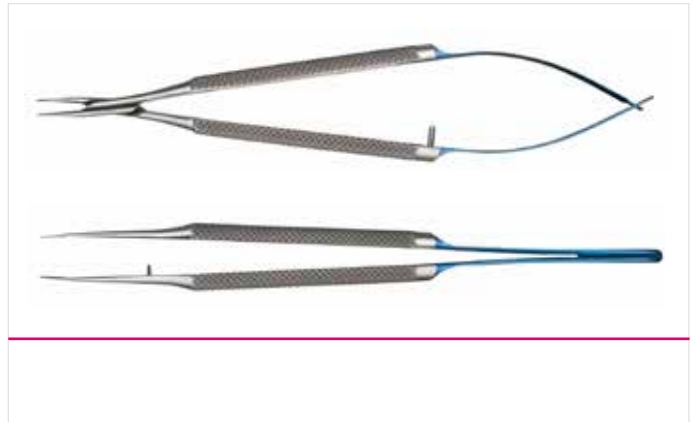


Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
MI 8035	Titan-Mikropinzette	Ø 10 mm, Länge 150 mm, Spitze gerade	1 Stück
MI 8037	Titan-Mikropinzette	Ø 10 mm, Länge 170 mm, Spitze gerade	1 Stück
MI 8045	Titan-Mikropinzette	Ø 10 mm, Länge 150 mm, mit Zähnen	1 Stück
MI 8047	Titan-Mikropinzette	Ø 10 mm, Länge 170 mm, mit Zähnen	1 Stück
MI 8010	Titan-Mikronadelhalter	für Nahtmaterial 10/0 - 12/0, Ø 10 mm, Länge 150 mm, Spitze gebogen	1 Stück
MI 8011	Titan-Mikronadelhalter	für Nahtmaterial 10/0 - 12/0, Ø 10 mm, Länge 150 mm, Spitze gerade	1 Stück
MI 8020	Edelstahl-Mikroschere	Ø 10mm, Länge 150 mm, Scherenblatt 10 mm, Spitze gebogen	1 Stück
MI 8038	Titan-Mikropinzette	Ø 8 mm, Länge 150 mm, mit Fadenplatte, Spitze gerade	1 Stück
MI 8039	Titan-Mikropinzette	Ø 8 mm, Länge 180 mm, mit Fadenplatte, Spitze gerade	1 Stück
MI 8012	Titan-Mikronadelhalter	für Nahtmaterial 10/0 - 12/0, Ø 8 mm, Länge 150 mm, Spitze gebogen	1 Stück
MI 8013	Titan-Mikronadelhalter	für Nahtmaterial 10/0 - 12/0, Ø 8 mm, Länge 180 mm, Spitze gebogen	1 Stück
MI 8038.1	Titan-Super-Mikropinzette	Ø 8 mm, mit Fadenplatte, Länge 150 mm, Spitze gerade, 0,1 mm	1 Stück
MI 8012.2	Titan-Super-Mikronadelhalter	für Nahtmaterial 10/0 - 12/0, Ø 8 mm, Länge 150 mm, Spitze gebogen, 0,2 mm	1 Stück

Stille Instrumente und Scheren

- Ergonomisches Design für geringe Belastung der Hand
- Starkes Gelenk mit Schrauben für einfaches Reparaturmanagement
- Härte für Schneidteile und Griffe ist unterschiedlich

Sind Sie interessiert an unseren Stille Produkten? Rufen Sie uns gerne an, damit wir sie über unsere vorhandenen Produkte informieren können.

 Tel. +49 (0) 5606 53060-400

 tiergesundheits@tapmed.de



Arbeitserleichterung durch einzigartige Sicherheitsmechanismen

Nadelstichverletzungen gehören zu den häufigsten Verletzungen bei medizinischem Personal. Sagen Sie diesem Problem den Kampf an und überzeugen Sie sich von einzigartigen Sicherheitsmechanismen.



Sicherheitskanülen SOL-CARE™

- Komfortable Einhand-Aktivierung des Sicherheitsmechanismus der Kanülenschutzvorrichtung
- Ein hörbares „Klick“ bestätigt die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
- Durch den patentierten Verriegelungsmechanismus verschwindet die Nadel vollständig und sicher in der Schutzvorrichtung
- Kompatibel mit Luer-Slip- und Luer-Lock-Düsen



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
SN1815	SOL-CARE Sicherheitskanüle 18G*1 ½"	100 Stück
SN2115	SOL-CARE Sicherheitskanüle 21G*1 ½"	100 Stück
SN22125	SOL-CARE Sicherheitskanüle 22G*1 ¼"	100 Stück
SN2410	SOL-CARE Sicherheitskanüle 24G*1"	100 Stück

SOL-M Standardkanüle

- Extra scharfe Nadel – minimiert das Unbehagen des Patienten
- farbcodierter Kunststoff-Ansatz
- Edelnadel mit spezieller Silikonschmierung macht Injektionen angenehmer
- Luer-Lock- und Luer-Slip-kompatibel



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
111815	SOL-M Standardkanüle 18G*1 ½"	100 Stück
112115	SOL-M Standardkanüle 21G*1 ½"	100 Stück
1122125	SOL-M Standardkanüle 22G*1 ¼"	100 Stück
112410	SOL-M Standardkanüle 24G*1"	100 Stück

SOL-CARE™ Sicherheitsspritzen mit Luer-Lock-Düse

- Manuell zurückziehbare Nadel verhindert Stichverletzungen und Wiederverwendung der Spritze
- Kolben kann nach Gebrauch und Einzug der Nadel abgebrochen werden
- Geringes Totraumvolumen durch langen, schmalen Pin am Ende des Kolbens
- Luer-Lock-Düse



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
120006IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 3 ml	100 Stück
120007IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 5 ml	100 Stück
120008IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 10 ml	100 Stück
120009IM	SOL-CARE Luer-Lock-Sicherheitsspritze ohne Kanüle, 20 ml	50 Stück

SOL-M Luer-Slip-Spritzen

- Silikonschmierung sorgt für eine reibungslose Kolbenbewegung
- Sichere Kolbenrücklaufsperre verhindert ein versehentliches Herausziehen des Kolbens
- Großer und stabiler Fingergriff sorgt für Stabilität und Komfort während der Injektion
- Luer-Slip-Düse
- Steril und zum Einmalgebrauch



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
P180011	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 1 ml	100 Stück
P180003ST	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 3 ml	100 Stück
P180005ST	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 5 ml	100 Stück
P180010ST	SOL-M Luer-Slip-Spritze ohne Kanüle, 10 ml	100 Stück

SOL-GUARD Insulinsicherheitsspritze 0,5ml (U 100)


- Reversible Transportsicherung kann über die Nadel geschoben werden und verhindert Nadelstichverletzungen
- Weniger Medikamentenverschwendung durch geringes Totraumvolumen
- Transportsicherung rastet durch Drehen ein und wird so zum irreversiblen Kanülenschutz



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
200002SG	SOL-GUARD Insulinsicherheitsspritze 0,5ml U100, inkl. Kanüle 29G*12"	100 Stück

SOL-VET™ 1ml U-40 Insulinspritze mit fester Nadel 29G*1/2"

- Optimale Nadelschärfe macht Injektionen angenehmer
- Geringer Totraum – minimiert die Verschwendung von Restmedikamenten
- Transparenter Zylinder
- Kräftige Markierungen erleichtern das Erkennen und Abmessen des Spritzeninhalts

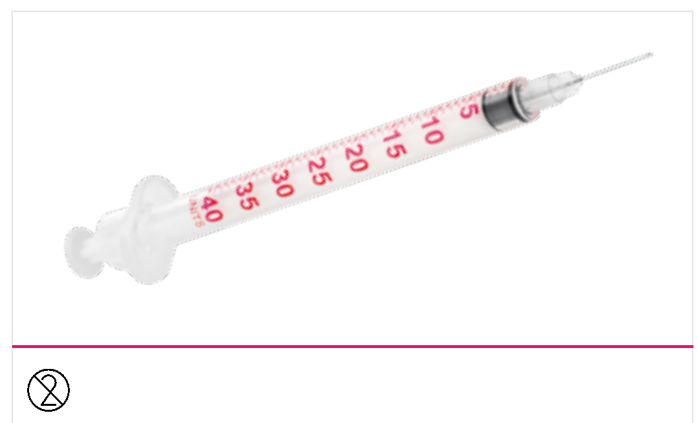

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
V12905-40	SOL-VET Insulinspritze 1ml U40, inkl. Kanüle 29G*1/2"	100 Stück

Arbeitssicherheit

In vielfacher Hinsicht ist die langfristige Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wünschenswert. Um gutes Personal lange zu halten, muss der Arbeitgeber sich auch um den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bemühen. Lassen Sie sich hierbei von cleveren Produkten unterstützen.



Anti-Müdigkeits-Matte™

- Hochwertige Polsterung
- Entlastet Füße, Beine und Rücken
- Abgeflachte Kanten verringern Stolpergefahr
- Wiederverwendbar



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
2317-P-single	Anti-Müdigkeits-Matte™, klein	33 x 43 x 1,9	1 Stück
2332-P-single	Anti-Müdigkeits-Matte™, mittel	51 x 81 x 1,9	1 Stück

Ergo-Step™

- leichte, stapelbare Tritte
- Rutschfeste gummierte Füße
- Vergrößerung der Arbeitsplattform durch seitliches Verbinden
- Stapelbar – Anpassung an die Arbeitshöhe

Der Ergo-Step ist kombinierbar mit der Anti-Müdigkeits-Matte Art.-Nr. 2317-P



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
1170-T-single	Ergo-Step™ Tritte - Oberteil	45,7 x 35,6 x 13,5	1 Stück
1170-B-single	Ergo-Step™ Tritte - Unterteil	45,7 x 35,6 x 13,5	1 Stück

Slideezi® – Gleittuch

- reißfest
- röntgenstrahlendurchlässig
- hervorragende Gleitfähigkeit
- einfaches Umlagern, dank praktischer Griffe



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
DFSH70200X25SP RED	Slideezi® - Gleittuch, wiederverwendbar	70 x 200 cm	1 Stück



TapMed VET Newsletter

Alle Produktneuheiten, Angebote und Infos als E-Mail



Jetzt
anmelden!

Wir wollen nachhaltiger werden, Sie auch?

Erhalten Sie einfach alle aktuellen
Angebote per E-Mail.

Jetzt anmelden!



Lagerung

Dekubitusprophylaxe und damit einhergehende professionelle Lagerung gewinnen in der Tiermedizin zunehmend an Bedeutung. Vervollständigen Sie ihr Sortiment mit universellen oder hoch spezialisierten Lagerungshilfen aus unserem Portfolio.



Vakuu-Matte VAC-PAC®

- schmiegt sich an jede Körperform an
- lässt sich am OP-Tisch befestigen
- gefüllt mit festen, verschieden kleinen Polystyrolkugeln
- Latexfrei
- Nicht leitend
- Röntgenstrahlendurchlässig



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
51608	Vakuu-Matte, mit Flügeln	133 x 86	1 Stück
51623	Vakuu-Matte	51 x 46	1 Stück
516*30/31/32/35	Vakuu-Matte	90 x 73/ 90 x 98/ 90 x 118/ 71 x 88	1 Stück



Vac-Pac Form 31
51631 | 90 x 98 cm



Vac-Pac Form 31
51631 | 90 x 98 cm

Nicht nur die Expertise rund um Dekubitusprophylaxe und den damit einhergehenden Einsatz der besten Produkte ist beim Thema Patientenlagerung relevant. Auch das verwendete Material spielt eine entscheidende Rolle. Trulife ist einer der langjährigen Partner von TapMed und überrascht uns immer wieder mit kreativen Produkten. Alle Trulife-Produkte sind wischdesinfizierbar.



OASIS (OA)

Die Oasis Produktpalette besteht aus einer umfangreichen Serie wiederverwendbarer Gelpolster und Lagerungshilfen aus 100 % Silikongel (Trugel). Sie bieten dem Patienten bei allen Operationsverfahren wirksamen Schutz und Komfort. Dies ist die erste Produktreihe, die Trulife für den OP-Bereich entwickelt hat.



OASIS ELITE (EL)

In der Oasis Elite Produktreihe wird Memory-Schaum mit Silikongel (Trugel) kombiniert. So wird zur Druckentlastung und zum Schutz des Patienten im OP eine hervorragende Qualität erzielt. Oasis Elite Produkte sind mehr als 50 % leichter als vergleichbare reine Gelprodukte.



Recycling-Foam

Recyclingschaumstoff

Der stabilisierende Recycling-Schaumstoff besteht aus, im Rahmen der Produktion, übrig gebliebenem Schaumstoff. Nach dem Schreddern werden die verschiedenen Schaumstoffflocken miteinander verklebt und ergeben so einen neuen Schaumstoff, der vor allem für Stabilität sorgt. Um den tierischen Patienten den bestmöglichen Komfort zu bieten, hat Trulife eine Memory-Schaum Auflage integriert und dann diese nachhaltige Kombination mit der bewährten, wischdesinfizierbaren Polyurethanfolie umhüllt.




AZURE (AZ)

Bei der Produktreihe Azure besteht jedes Produkt aus zwei unabhängigen Gelschichten (Trugel und Ultrasoftgel), die ihre Wirkung in der Kombination entfalten. Die anatomisch geformten Polster bieten eine effektive Anpassung an den Körper des Patienten. Dadurch wird ein wirksamer Schutz vor Nerven-, Haut- und Gewebeschäden erreicht. Die Intention für Azure lag in der Schaffung eines Produktes, das in seiner Wirkung einer zusätzlichen Schutzschicht aus Gewebe und Haut nachempfunden ist.

Trulife OP-Tischauflage

Die Trulife OP-Tischauflagen dienen der Dekubitusprophylaxe und können bei allen Operationen verwendet werden. Die wärmeleitenden Eigenschaften des Trugels begünstigen die Anwendung auf beheizbaren OP-Tischen.

- ideale Dekubitusprophylaxe
- wärmeleitend und deshalb geeignet zur Anwendung auf beheizten OP-Tischen oder Wärmematten
- abwaschbar
- Gel läuft bei Beschädigung nicht aus

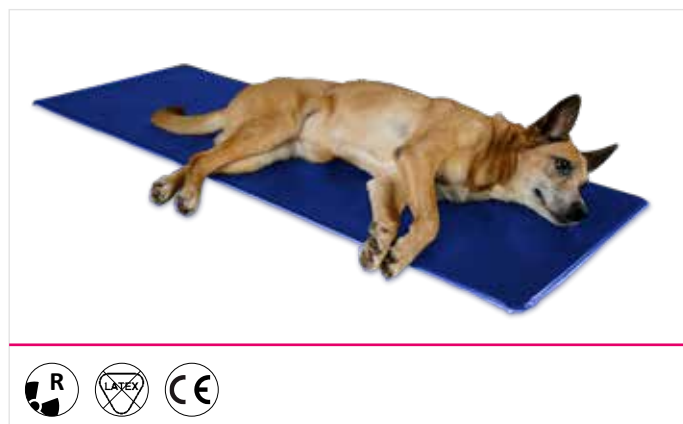

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
VETOA003	Trulife OP-Tischauflage	130 x 40 x 1 cm	1 Stück

OASIS Kopfring, offen

Die offenen Oasis Kopfringe sind weich und komfortabel. Sie schützen Kopf und Ohren des Patienten in Seitenlage und erlauben den einfachen Zugang zur Intubation während der Operation.

- zur Anwendung in Bauch-Brust- oder Seitenlage
- zum Überstrecken des Kopfes in Rückenlage
- abwaschbar
- Gel läuft bei Beschädigung nicht aus



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
OA020	OASIS Kopfring, offen, klein	90 x 40 x 20 mm	1 Stück
OA021	OASIS Kopfring, offen, mittel	140 x 60 x 35 mm	1 Stück
OA022	OASIS Kopfring, offen, groß	225 x 215 x 55 mm	1 Stück

ELITE Kopfring, offen und geschlossen

- in Seitenlage sorgen die offenen Ringe für eine leicht abschüssig geneigte Schnauze
- in Rückenlage eignen sie sich zum Überstrecken des Kopfes
- die stabilen Ringe (offen und geschlossen) eignen sich auch zur Positionierung von Schildkröten in Rückenlage



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
EL021	ELITE Kopfring, offen, mittel	210 x 160 x 50 mm	1 Stück
EL022	ELITE Kopfring, offen, groß	225 x 215 x 50 mm	1 Stück
EL011	ELITE Kopfring, geschlossen, mittel	140 x 34 mm	1 Stück
EL012	ELITE Kopfring, geschlossen, groß	200 x 50 mm	1 Stück



Trulife AbdoRi Lagerungsrinne Art.-Nr. VET FM 002; Trulife Elite Kopfschale Rückenlage Art.-Nr. EL151

ELITE Kopfschale Rückenlage

- zuverlässiges Verhindern von Druckgeschwüren bei längeren Operationen in Rückenlage
- besonders geeignet für große Hunde, Affen sowie kleine bis mittlere Huftiere



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
EL151	Trulife Elite Kopfschale Rückenlage	275 mm x 237 mm x 90 mm	1 Stück

AbdoRi Lagerungsrinne

- Tiere liegen deutlich ruhiger als in vergleichbaren Positionierern
- integrierte Memory-Schaum Auflage hält die Körpertemperatur konstant
- zur Erweiterung lässt sich eine 2. AbdoRi mittels Klett an der ersten befestigen



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
VET002-single	Trulife Lagerungsrinne, 60 cm x 32 cm x 10,5 cm (LxBxH)	1 Stück
VET002-set	Trulife Lagerungsrinnen-Set, 60 cm x 32 cm x 10,5 cm (LxBxH)	2 Stück

Nervenschutzpolster OA061

- Breite und Länge passen perfekt um herkömmliche Zahnbehandlungsringe
- Trügel schützt die Haut am Kinn des Pferdes vor Druckstellen
- clever angebrachter Klettverschluss vereinfacht die Montage



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
OA061	OASIS Nervenschutzpolster, groß, 46 cm x 21 cm x 0,8 cm (LxBxH)	1 Stück

VET001 Lagerungshilfe für Kleintiere

- kann im Inkubator, Backofen oder auf der Heizung auf Körpertemperatur vorgewärmt werden
- große Auflagefläche begünstigt Blutzirkulation
- formbeständig
- abwaschbar



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
VET001	AZURE Lagerungshilfe für Kleintiere	515 x 180 x 40 mm	1 Stück

Positionierpolster Keil, groß

- verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
- Hygiene-Filter sorgt für Luftaustausch
- Schaumstoff ist formstabil



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
ELP218	Trulife Positionierpolster Keil, 30 cm x 50 cm x 15 cm (LxBxH)	1 Stück

Positionierpolster Keil, extra groß

- verschweißte Nähte verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten
- Hygiene-Filter sorgt für Luftaustausch
- Schaumstoff ist formstabil
- extra für Pferde entwickelt



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
VETFM004	Trulife Positionierpolster Keil, 31 cm x 50 cm x 25 cm (LxBxH)	1 Stück

AnubiMed medical – hygienisch · formstabil · sicher

AnubiMed medical sind hygienische Polster, Positionierer und Auflagen für den Einsatz in der Tierlinik oder Praxis.

Die Füllung der Produkte aus hochwertigem, langlebigem **Memory-Schaum** hat eine außergewöhnlich hohe Formstabilität und gewährleistet beste Druckentlastungseigenschaften.

Die robuste, hautfreundliche **Polyurethanhülle** ist sicher verschweißt und dadurch flüssigkeitsdicht. Die fein strukturierte Oberfläche vermeidet Hitzestau zwischen dem Polster und darauf liegender Haut.

Der integrierte, patentierte **PneumaPure®**-Filter sorgt für den benötigten Luftaustausch, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten und Pathogenen.

Die **schnelle und einfache Reinigung** mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln ermöglicht häufige Anwendungs- bzw. Patientenwechsel.


Infektionsrisiken können so bestens reduziert werden.



Der PneumaPure™ - Filter

Alle Produkte der AnubiMed Kollektion sind mit einer Hülle von einem undurchlässigen und robusten Material aus Bio Shield Gewebe umgeben.

Der integrierte **PneumaPure®**-Filter sorgt für Luftaustausch und verhindert mit seiner geringen Porengröße gleichzeitig das Eindringen von Flüssigkeiten, Krankheitserregern und Parasiten.

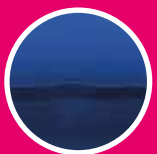


Verschweißte Nähte

Absolut flüssigkeitsabweisend – kein Eindringen von Blut, Urin, Schweiß und anderen Flüssigkeiten



Memory-Schaum

Entlastet die Gelenke, ist besonders formstabil und nimmt nach kurzer Zeit die Körpertemperatur des Patienten an.

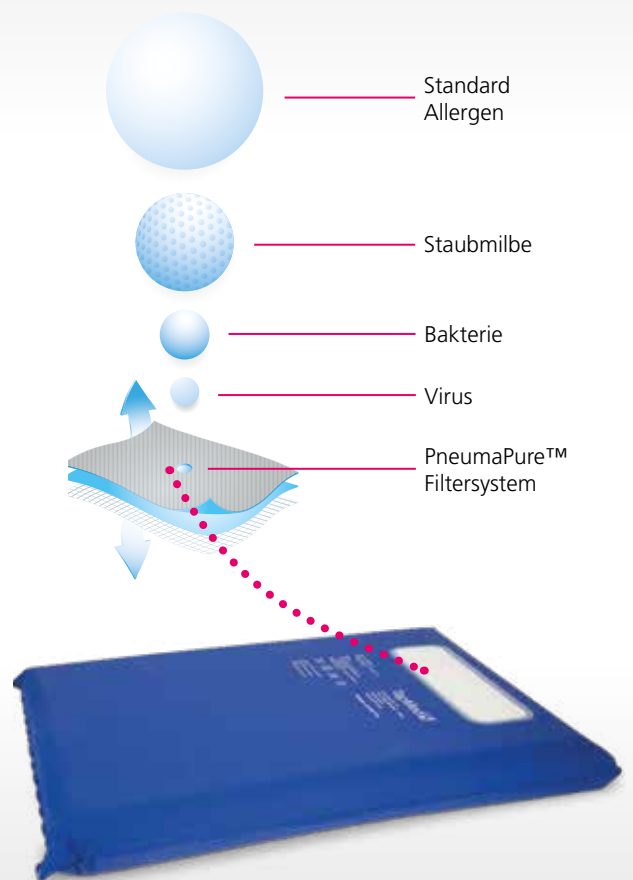

AnubiMed Tischauflage

- passt auf jeden gängigen OP-Tisch
- thermosensitiv
- isolierend
- auch für hohes Gewicht geeignet (>50 kg)



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
3012091	AnubiMed Tischauflage, 120 x 60 x 5 cm	1 Stück
3010048	AnubiMed Tischauflage, 120 x 40 x 5 cm	1 Stück



AnubiMed Positionierer

- hochwertiges Universalpolster
- zur Unterstützung der perfekten Positionierung
- als Kopfkissen für große Tiere
- als Unterlage für kleine Heimtiere



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
3012022-single	AnubiMed Positionierer klein, 30 x 40 x 8 cm	1 Stück

AnubiMed Keil und Rolle

- zur Polsterung in Seitenlage
- zur Stabilisierung in Rückenlage
- zur Positionierung von Kopf, Schnauze oder Extremitäten




Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
3012072-single	AnubiMed Keil, 40 x 20 x 10 cm	1 Stück
3012047-single	AnubiMed Rolle, 60 x 15 cm	1 Stück

TIPP!

Jeder unserer AnubiMed Positionierer ist ebenfalls für die Polsterung des menschlichen Körpers geeignet und kann beispielsweise zur Förderung einer ergonomisch korrekten Sitzposition am Schreibtisch verwendet werden.

AnubiMed hygienisches Hundebett

- wischdesinfizierbar für schnellste Reinigung
- kleine Größen (S-L) aus reinem thermosensitiven Memory-Schaum
- große Größen mit zusätzlichem Komfortschaum für hohes Gewicht

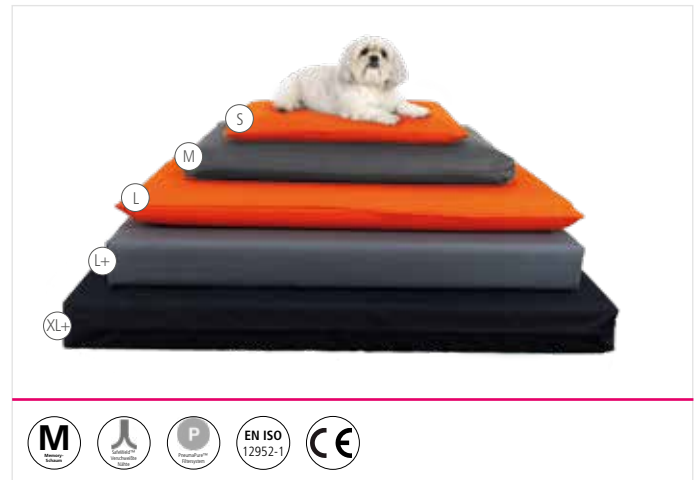

Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
3012012	AnubiMed Hundebett S*	45 x 65 x 8 cm	1 Stück
3012035	AnubiMed Hundebett M*	65 x 90 x 9 cm	1 Stück
3012096	AnubiMed Hundebett L*	70 x 110 x 11 cm	1 Stück
3012097	AnubiMed Hundebett L+*	80 x 120 x 12 cm	1 Stück
3010042	AnubiMed Hundebett XL+*	95 x 135 x 12 cm	1 Stück

*die abgebildeten Textilbezüge sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.

AnubiMed für Pferde


- cleveres Sandwichsystem aus Memory-Schaum und Komfortschaum
- geeignet für besonders hohes Gewicht
- zuverlässiges Vorbeugen von Nekrosen
- einzeln als Fohlenbett geeignet
- 3 Stück passen auf herkömmliche Pferde OP-Tische

Sind Sie interessiert an AnubiMed für Pferde? Buchen Sie jetzt einen Beratungstermin direkt bei Ihnen vor Ort oder online.

☎ Tel. +49 (0) 5606 53060-400



Artikel Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
3010042	AnubiMed XL+, 95 x 135 x 12 cm (L x B x H)	1 Stück

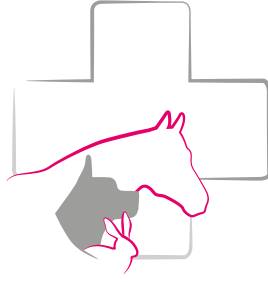

Wir beraten Sie gerne!


☎ Tel. +49 (0) 5606 53060-400


✉ tiergesundheit@tapmed.de



TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen
www.tapmed.de · info@tapmed.de

 Online-Shop: www.anubimed.de

 Instagram: [tapmed_vet](https://www.instagram.com/tapmed_vet)