



AZURE 400 VET

Lagerungshilfe für Kleintiere in Rückenlage

Silikongel, umhüllt von robuster, lösemittelfester PU-Folie

Größe: 515 x 180 x 40 mm | VE: 1 Stück

- kann im Inkubator auf Körpertemperatur vorgewärmt werden
- vergrößerte Auflagefläche begünstigt Blutzirkulation
- formbeständig
- wiederverwendbar
- abwaschbar und desinfizierbar
- Gel läuft bei Beschädigung nicht aus



*Kastration
Kaninchen in Rückenlage*

AZURE VET


Sichere Lagerungshilfen zum Schutz vor Nervenschädigungen
und Druckgeschwüren bei Kleintieren



Trulife Produkte der Serie AZURE zeichnen sich durch den innovativen Aufbau aus 2 verschiedenen Silikongelen aus. Die dickere aber leichte Schicht Ultrasoftgel und die dünnere Schicht Trugel imitieren die Beschaffenheit von Gewebe und Haut. So hat Trulife mit der Serie Azure für die Dekubitusprophylaxe einen völlig neuen Standard gesetzt.



Alle AZURE Produkte sind frei von Latex und Weichmachern. Sie halten Temperaturen zwischen -12 °C und +50 °C problemlos stand und können gekühlt oder vorgewärmt werden. Sie sind röntgenstrahlendurchlässig bei 102 mA, 70 kv und 2,8 – 3,6 ms. So ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im OP.

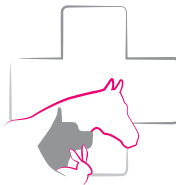

Wir beraten Sie gerne!

☎ Tel. +49 (0) 5606 53060-400

✉ tiergesundheit@tapmed.de